

Prestatiekenmerken

INHOUD

1	DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED	4
2	TERMEN EN DEFINITIES	5
2.1	<i>Juistheid (Eng: Trueness)</i>	5
2.2	<i>Precisie (Eng.: Precision)</i>	6
2.3	<i>Herhaalbaarheid (Eng: Repeatability)</i>	6
2.4	<i>Reproduceerbaarheid (Eng.: Reproducibility)</i>	6
2.5	<i>Meetonzekerheid (Eng: Expanded uncertainty)</i>	7
2.6	<i>Selectiviteit en specificiteit (Eng: Selectivity, Specificity)</i>	7
2.7	<i>Aantoonbaarheidsgrens (Eng: Limit of detection)</i>	7
2.8	<i>Bepalingsgrens (Eng: Limit of quantitation)</i>	8
2.9	<i>Lineariteit (Eng: Linearity)</i>	8
2.10	<i>Werkgebied of bereik (Eng: Range, Measuring range, Working range)</i>	8
2.11	<i>Robuustheid (Eng: Ruggedness, Robustness)</i>	9
2.12	<i>Analyse</i>	9
3	ALGEMEEN VALIDATIEPLAN	10
3.1	<i>Selectie van de te bepalen prestatiekenmerken</i>	10
3.2	<i>Bepaling van het toepassingsgebied en eventuele deelgebieden bij de validatie</i>	11
3.3	<i>Omgang met externe eisen</i>	11
3.4	<i>Keuze van de monsters voor een validatieonderzoek</i>	12
4	ALGEMENE PROCEDURE VOOR DE BEPALING VAN DE AFZONDERLIJKE PRESTATIEKENMERKEN	13
4.1	<i>Juistheid</i>	13
4.1.1	<i>Meervoudige analyse van een referentiemateriaal</i>	13
4.1.2	<i>Terugvindingsexperimenten op een geselecteerd monster</i>	14
4.1.3	<i>Evaluatie van de terugvinding en/of afwijking ten opzichte van de referentiewaarde voor verschillende monsters</i>	14
4.2	<i>Herhaalbaarheid en intra-reproduceerbaarheid</i>	15
4.2.1	<i>Meervoudige analyse van hetzelfde monster</i>	16
4.2.2	<i>Duplo-analyse van verschillende monsters</i>	16
4.3	<i>Selectiviteit en robuustheid</i>	17
4.4	<i>Aantoonbaarheidsgrens en bepalingsgrens</i>	18
4.4.1	<i>Meervoudige analyse van een praktijkmonster met laag gehalte</i>	18
4.4.2	<i>Duplo-analyse van verschillende praktijkmonsters met laag gehalte</i>	18
4.5	<i>Lineariteit - modelafwijking</i>	19
4.6	<i>Werkgebied</i>	20

5	REFERENTIES	21
	BIJLAGE A RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT ADDITIE	23
A.1	ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR ADDITIE	23
A.2	SPECIFIEKE RICHTLIJNEN VOOR ADDEREN VAN VERSCHILLENDE MATRICES VOOR ORGANISCHE PARAMETERS	23
A.2.1	Adderen aan vloeistoffen	23
	BIJLAGE B MINIMALE EISEN MET BETREKKING TOT BEPALINGSGRENZEN	24
B.1	ANORGANISCHE PARAMETERS	24
B.2	ORGANISCHE PARAMETERS	32

1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Het toepassingsgebied is verruimd tot alle analysemethoden. De aanpak voor het onderzoek inzake de gelijkwaardigheid van methoden wordt niet meer opgenomen vermits een statistische benadering voor gelijkwaardigheid een aantal beperkingen inhoudt qua matrices, concentratiegebied, enz. Het oordeel van expert(en) is doorslaggevend voor de uitspraak inzake de gelijkwaardigheid van analysemethoden.

Analyseresultaten zijn slechts benaderingen van de ware waarde. De mate waarin analyseresultaten kunnen afwijken wordt gekwantificeerd met prestatiekenmerken. Zij weerspiegelen de prestatie (performantie) van een analysemethode onder verschillende omstandigheden. Het maatschappelijk belang van metingen maakt het noodzakelijk om voldoende inzicht te hebben in de mogelijkheden en beperkingen van de gebruikte analysemethoden.

De validatie van een analysemethode wordt gedefinieerd als het aantonen dat de (beschreven) analysemethode geschikt is voor de beoogde toepassing. Dit impliceert het vaststellen van de relevante prestatiekenmerken van de analysemethode en het evalueren van de geschiktheid voor het beoogde doel. Dit wordt in ISO 8402 als volgt verwoord: 'confirmation by examination and provision of objective evidence that the particular requirements for a specified intended use are fulfilled'. Hierbij dient vermeld te worden dat in de huidige praktijk er niet steeds duidelijkheid is betreffende externe eisen (uit regelgeving, contracten, ...) en de status ervan.

Methoden moeten gevalideerd worden telkens wanneer het nodig is om te verifiëren dat de prestatiekenmerken geschikt zijn voor toepassing bij een specifiek analytisch probleem. Dit is bijvoorbeeld zo voor nieuwe analysemethoden die met een bepaald doel ontwikkeld zijn, maar ook voor reeds gevalideerde analysemethoden die aangepast of uitgebreid worden, die blijkens de kwaliteitscontrole met de tijd veranderen, die in een ander laboratorium of door andere analisten of met andere apparatuur gebruikt worden, De verkregen prestatiekenmerken zijn daarom alleen geldig voor het desbetreffende laboratorium, en de uitvoeringsomstandigheden (analysemethode, ...) dienen hierbij te zijn vastgelegd. De uitgebreidheid van een (her)validatie hangt af van de mate van verandering. Eurachem en de nationale accreditatie-organismen zoals Belac stellen dat een minimale validatie steeds aangewezen is, ook indien een genormeerde analysemethode toegepast wordt.

Met betrekking tot de te valideren parameters kan men een onderscheid maken tussen kwalitatieve analysemethoden, kwantitatieve analysemethoden op hoog concentratieniveau en kwantitatieve analysemethoden op laag concentratieniveau. De meerderheid van de milieu-analysemethoden behoren tot laatstgenoemde categorie en bijgevolg is deze procedure ook hoofdzakelijk op dit type methoden gericht. Algemeen dient bij dergelijke validatie steeds maximale aandacht aan juistheid en precisie geschonken te worden en, indien relevant, ook aan de aantoonbaarheidsgrens.

Van elk validatieonderzoek wordt een apart rapport gemaakt, dat voldoet aan vooraf vastgelegde regels wat betreft opbouw, inhoud, beoordeling, goedkeuring en archivering.

Deze procedure behandelt enkel de intralaboratoriumvalidatie van analysemethoden voor fysische en chemische univariate grootheden. Voor de bepaling van prestatiekenmerken voor een groep van laboratoria worden o.a. in ISO 5725 procedures gegeven; de bepaling van dergelijke prestatiekenmerken vergt interlaboratoriumonderzoek.

2 TERMEN EN DEFINITIES

2.1 JUISTHEID (ENG: TRUENESS)

De juistheid van een analysemethode is de mate van overeenstemming tussen het gemiddelde van een reeks meetwaarden en de werkelijke waarde of de als werkelijk aangenomen waarde van de te bepalen grootte (cfr. ISO 3534-1). De gebruikelijke maat voor de juistheid is de bias b , die dus overeenkomt met de (positieve of negatieve) systematische fout¹.



De verwijzing van juistheid naar de term accuraatheid (Eng. Accuracy), nauwkeurigheid of een afgeleide ervan wordt door Eurachem ontraden. In hun meest gangbare betekenis omvatten deze termen een combinatie van 'random' componenten en de 'bias' component, en sluiten ze dus meer aan bij de term meetonzekerheid.

Met de term terugvinding T (Eng: Recovery) wordt de fractie van de component bedoeld die bij analyse wordt teruggevonden, na toevoeging onder gedefinieerde omstandigheden van een bekende hoeveelheid component aan het monster. In dit document worden terugvindingsexperimenten als één van de mogelijke werkwijzen voor bepaling van de juistheid van een analysemethode beschouwd en wordt geen systematisch onderscheid gemaakt tussen de termen juistheid en terugvinding.

In het geval een (referentie)methode wordt opgelegd voor het meten van een welbepaalde grootte, kan juistheid eveneens worden geïnterpreteerd als zijnde de mate van overeenstemming tussen de meetwaarde van het laboratorium en de als werkelijk aangenomen waarde van de te bepalen grootte met dezelfde methode (gewoonlijk volgend uit een interlaboratoriumvergelijking). In dit geval spreekt men van de bias ten opzichte van een methodegemiddelde. De keuze van de te rapporteren bias dient uit de context van de analyse-aanvraag duidelijk te zijn, en zo nodig afgesproken te worden met de klant.

Er kan verder een opsplitsing gemaakt worden tussen twee gevallen van bias, namelijk constante absolute bias en proportionele bias. Bij proportionele bias is de relatieve afwijking op ieder concentratieniveau constant en wordt deze procentueel uitgedrukt. In het geval van absolute constante bias is de afwijking op ieder concentratieniveau, absoluut uitgedrukt, even groot. Onderstaande grafieken verduidelijken beide gevallen van juistheidseffecten ten opzichte van het ideale geval (diagonaal). Voor hogere gehalten overheerst het proportionele deel van de juistheid meestal het constante deel. Voor gehalten nabij de aantoonbaarheidsgrens spelen proportionele juistheidseffecten een ondergeschikte rol.

¹ In principe is de systematische afwijking een gemiddelde dat het resultaat is van een oneindig aantal metingen van dezelfde meetgrootte, uitgevoerd onder herhaalbaarheidscondities, verminderd met de ware waarde van de meetgrootte (cfr. NPR 2814).

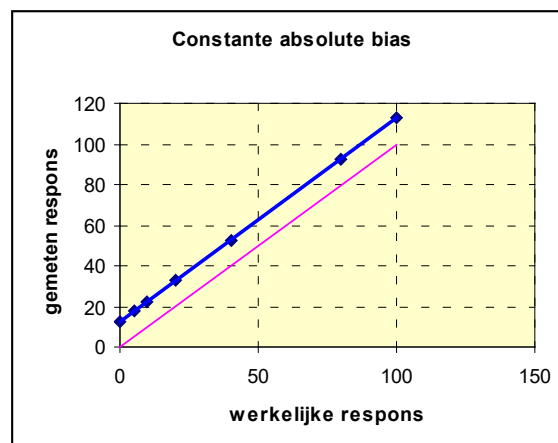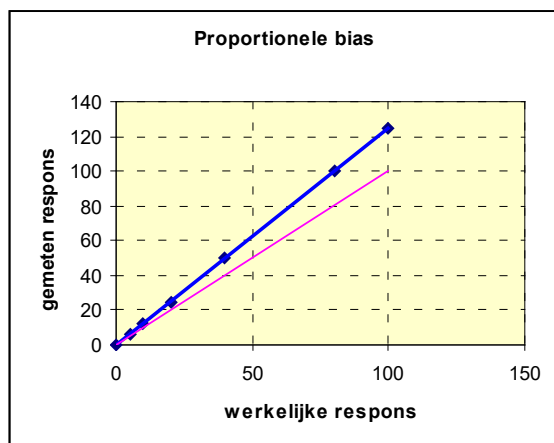

2.2 PRECISIE (ENG.: PRECISION)

De precisie van een analysemethode is de mate van spreiding in de analyseresultaten die verkregen worden door de analysemethode een herhaald aantal malen onder vastgelegde condities op hetzelfde monster uit te voeren (cfr. ISO 3534-1). De gebruikelijke maat voor de precisie is de standaardafwijking of de variatiecoëfficiënt (relatieve standaardafwijking) van de testresultaten, dit wil zeggen dat de precisie wordt uitgedrukt als imprecisie. Naar de condities wordt normaal gerefereerd met de termen herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid.

2.3 HERHAALBAARHEID (ENG: REPEATABILITY)

Met herhaalbaarheid wordt bedoeld de precisie verkregen bij uitvoering van alle betreffende metingen door dezelfde analist, met dezelfde meetapparatuur, op zo dicht mogelijk bij elkaar gelegen tijdstippen (cfr. ISO 3534-1). De gebruikelijke maat is de herhaalbaarheidsstandaardafwijking s_r of de herhaalbaarheidsvariatiecoëfficiënt CV_r .

2.4 REPRODUCEERBAARHEID (ENG.: REPRODUCIBILITY)

Met reproduceerbaarheid wordt bedoeld de precisie verkregen bij uitvoering van alle betreffende metingen onder variabele omstandigheden, dit wil zeggen in verschillende laboratoriumruimten, door verschillende analisten, met verschillende apparaten en batches reagentia/standaarden, op verschillende tijdstippen met grotere tussenpozen (cfr. ISO 3534-1). Bij een uitspraak met betrekking tot reproduceerbaarheid dient bijgevolg aangegeven te worden welke condities veranderd werden.

Deze procedure richt zich enkel op de reproduceerbaarheid binnen een bepaald laboratorium (kortweg intra-reproduceerbaarheid), en als minimale eis hiervoor wordt vooropgesteld dat de factor tijd gevarieerd wordt, met andere woorden dat de betreffende analyses op verschillende dagen en in verschillende analysereeksen worden uitgevoerd (Eng.: Time-dependent intermediate precision). De gebruikelijke maat is de intra-reproduceerbaarheidsstandaardafwijking s_R of de intra-reproduceerbaarheids-variatiecoëfficiënt CV_R .

2.5 MEETONZEKERHEID (ENG: EXPANDED UNCERTAINTY)

De meetonzekerheid U wordt gedefinieerd als de halve lengte van een interval waarbinnen de ware waarde wordt verwacht te liggen, en dit bij een bepaald betrouwbaarheidsniveau. In ISO GUM wordt dit als volgt verwoord: 'Quantity defining an interval about a result of a measurement that may be expected to encompass a large fraction of the distribution of values that could reasonably be attributed to the measurand'.

In principe dient de meetonzekerheid alle factoren te omvatten die van invloed zijn op het resultaat, gecombineerd volgens gevestigde procedures. Relevante factoren zijn:

- de monsterbewaring in het laboratorium;
- de initiële monstervoorbehandeling (bijv. homogenisatie, droging, deelmonsterneming, ...);
- de monstervoorbereiding (bijv. extractie, ontsluiting, zuiveringen, ...);
- de eigenlijke meting van het preparaat (bijv. kalibratie, interferenties, ...) en
- de berekening van het analyseresultaat (bijv. correcties, ...).

In het kader van deze procedure is er van uitgegaan dat de meetonzekerheid zich beperkt tot het eigenlijke laboratoriumgebeuren (d.w.z. de vijf hoger vermelde stappen) en dat factoren zoals de monsterneming zelf (bijv. representativiteit, ...) en het transport van het monster naar het laboratorium (bijv. conservering, ...) niet per definitie opgenomen worden in de meetonzekerheid.

De prestatiekenmerken die de meetonzekerheid - of tenminste een gedeelte ervan - bepalen zijn de intra-reproduceerbaarheid van de analysemethode (voor wat de toevallige afwijking betreft) en de juistheid van de analysemethode (voor wat de systematische afwijking betreft). Door het in rekening brengen van een factor (Eng. coverage factor) op de toevallige afwijking wordt de waarschijnlijkheid dat de ware waarde in het interval ligt voldoende groot gemaakt.

Merk op dat meetonzekerheid geen prestatiekenmerk is, maar een karakteristiek van een meetwaarde. Mede om deze reden wordt meetonzekerheid in een apart deel nader bekeken (zie WAC/VI/A/002).

2.6 SELECTIVITEIT EN SPECIFICITEIT (ENG: SELECTIVITY, SPECIFICITY)

De selectiviteit van een analysemethode is de (on)afhankelijkheid van een andere grootheid dan de meetgrootheid, met andere woorden de mate waarmee ze de te bepalen component in een mengsel of matrix kan onderscheiden van andere bestanddelen (cfr. IUPAC, NEN 7777). Bij een voldoende selectieve analyse worden de bepalingcondities zo gekozen dat de bijdragen van andere bestanddelen geëlimineerd worden of binnen de onzekerheidsmarge vallen. Deze potentiële bijdragen betreffen zowel interferenties (vanwege grootheden die zelf een signaal veroorzaken) als matrixeffecten (vanwege grootheden die het signaal van de meetgrootheid veranderen).

Een analysemethode is specifiek als ze enkel reageert op de te bepalen component (cfr. AOAC, IUPAC). Specificiteit kan dus beschouwd worden als de ultieme selectiviteit. Het gebruik van deze term wordt door IUPAC ontraden.

2.7 AANTOONBAARHEIDSGRENS (ENG: LIMIT OF DETECTION)

De aantoonbaarheidsgrens AG (ook wel detectielimiet genoemd) is de kleinste hoeveelheid stof of laagste concentratie van de component in het monster die met een bepaalde (en redelijke)

statistische waarschijnlijkheid met de analysemethode aangetoond kan worden, met andere woorden waarvan de aanwezigheid nog met een bepaalde (on)zekerheid kan worden vastgesteld (cfr. AOAC, IUPAC). Het is bijgevolg een kwalitatief criterium.

In de gebruikelijke operationele definitie wordt het aspect waarschijnlijkheid in rekening gebracht door de aantoonbaarheidsgrens gelijk te stellen aan 3 maal de standaardafwijking op dit niveau (cfr. IUPAC). De aantoonbaarheidsgrens is aldus de waarde van de meetgrootte waarbij de variatiecoëfficiënt bij conventie 33% bedraagt. Voor meer achtergrondinformatie hieromtrent wordt verwezen naar NEN 7777 en de daarin opgenomen referenties.

2.8 BEPALINGSGRENS (ENG: LIMIT OF QUANTITATION)

De bepalingsgrens, BG, wordt gedefinieerd als de kleinste hoeveelheid stof of laagste concentratie van de component in het monster die met een bepaalde (en redelijke) precisie en juistheid met de analysemethode gekwantificeerd kan worden, met andere woorden waarvan de meetwaarde nog met een bepaalde (on)zekerheid kan worden vastgesteld. In tegenstelling tot de aantoonbaarheidsgrens is de bepalingsgrens een kwantitatief criterium.

Pragmatisch wordt de bepalingsgrens in het kader van deze procedure gelijk gesteld aan 6 maal de standaardafwijking in eenheden van de meetgrootte. Bijgevolg is de bepalingsgrens die waarde van de meetgrootte waarbij de variatiecoëfficiënt 17% bedraagt.

2.9 LINEARITEIT (ENG: LINEARITY)

De lineariteit van een analysemethode is de eigenschap dat binnen vastgelegde grenzen er een rechtlijnig verband bestaat tussen de respons en de hoeveelheid (concentratie) van de te bepalen component. Het lineair gebied is het overeenkomstig werkgebied.

Indien niet aan lineariteit is voldaan, dient het werkgebied te worden versmald of moet worden overgeschakeld op een andere (bv. kwadratische) functie tussen respons en hoeveelheid (concentratie) van de te bepalen component.

Met het begrip modelafwijking wordt algemeen de afwijking ("lack of fit") bedoeld van het aangenomen verband tussen meetgrootte en respons.


2.10 WERKGEBIED OF BEREIK (ENG: RANGE, MEASURING RANGE, WORKING RANGE)

Als extrapolatie van de IUPAC-definitie die instrumentgericht is, wordt het werkgebied van een analysemethode gedefinieerd als het interval tussen de kleinste en de grootste hoeveelheid (concentratie) van de te bepalen component waarvoor de analysemethode gevalideerd is, met andere woorden waarbinnen de prestatiekenmerken aan gedefinieerde eisen voldoen.

Hieruit volgt dat een werkgebied meestal vooropgesteld wordt bij het begin van het validatieonderzoek, rekening houdend met bv. toestelgegevens, verwachte gehalten in monsters, van toepassing zijnde regelgeving, Bij een optimaal werkgebied kunnen courante concentraties probleemloos worden gemeten en liggen kritische (cfr. regelgeving) concentraties niet helemaal aan de uitersten van het werkgebied.

Men noemt een werkgebied homogeen indien over het hele werkgebied de standaardafwijking (standaard deviatie) constant is (homoscedasticiteit of homogeniteit van de varianties). In praktijk

is dit zelden het geval, behalve bij kleine werkgebieden; meestal is in het bovenste deel van het werkgebied de relatieve standaardafwijking constant (variatiecoëfficiënt) en neemt met andere woorden de standaardafwijking proportioneel toe met de concentratie.

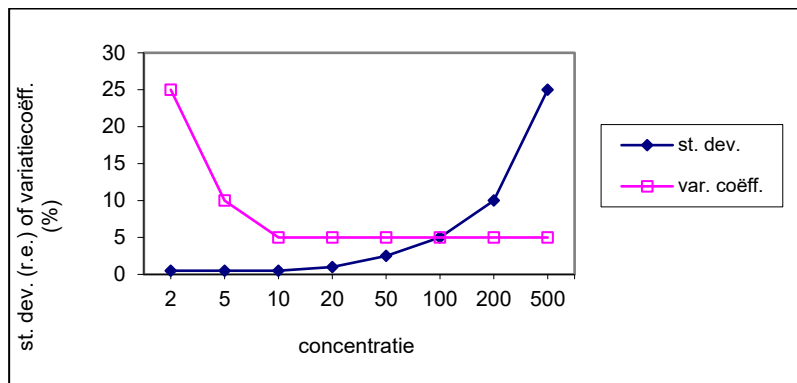

r.e.: respons eenheid

2.11 ROBUUSTHEID (ENG: RUGGEDNESS, ROBUSTNESS)

Onder robuustheid van een methode wordt de ongevoeligheid van het analyseresultaat verstaan voor kleine variaties in uitvoering, omstandigheden en hoedanigheid van afvalstoffen, zoals deze in de praktijk kunnen voorkomen (cfr. AOAC, NEN 7777).

2.12 ANALYSE

In het kader van validatie-experimenten komt het begrip analyse, zoals verder in de tekst vermeld, neer op het zo getrouw mogelijk uitvoeren van de volledige reeks stappen welke een routinemonster in het laboratorium ondergaat, van de gebruikelijke monstervoorbehandeling (deelmonsterneming, ...) tot en met de meting en berekening. Op die manier omvatten de prestatiekenmerken en de meetonzekerheid het gehele laboratoriumgebeuren en karakteriseren ze op een correcte wijze de analysemethode, respectievelijk de meetwaarden, van het laboratorium.

Wat de monstervoorbehandeling betreft komen typisch volgende situaties voor:

- in routine ondergaat het laboratoriummonster in zijn geheel een bepaalde monstervoorbehandeling (homogenisatie, droging, ...) vooraleer een analyseportie wordt afgenomen: in dat geval wordt bij de validatie-experimenten voor elke bepaling uitgegaan van een nieuwe portie van het aldus initieel voorbehandelde monster en volgt deze portie verder volledig de voor routinemonsters gebruikelijke werkwijze;
- in routine wordt uit het laboratoriummonster op welbepaalde wijze een deelmonster genomen, dat vervolgens een verdere voorbehandeling (droging, ...) ondergaat of rechtstreeks gebruikt wordt bij de monstervoorbereiding: in dat geval wordt bij de validatie-experimenten voor elke bepaling uitgegaan van een nieuw, op de gebruikelijke manier bekomen, deelmonster uit het laboratoriummonster en volgt dit verder volledig de voor routinemonsters gebruikelijke werkwijze.

Voor de bepaling van parameters waarvoor het hele monster dient in behandeling te worden genomen of die onmiddellijke analyse vereisen (bv. zwevend stof, biologisch zuurstof verbruik, vluchtige organische stoffen...) kan het noodzakelijk zijn om - in het kader van validatie experimenten - bij de monsternamen verschillende deelmonsters te voorzien.

3 ALGEMEEN VALIDATIEPLAN

In het algemeen worden bij validatieonderzoek de volgende stappen doorlopen (cfr. NEN 7777):

- bepaal op basis van het doel en de status van de analysemethode welke prestatiekenmerken bepaald moeten worden;
- bepaal het toepassingsgebied (matrices en werkgebied) waarvoor de analysemethode gevalideerd moet worden, en in hoeveel deelgebieden dit praktisch moet opgesplitst worden;
- ga na of er externe eisen gelden voor (een deel van) de prestatiekenmerken, en zo ja welke vorm deze hebben;
- ga na welke monsters nodig zijn voor het validatieonderzoek;
- voer het validatieonderzoek uit;
- beoordeel de vastgestelde prestatie in vergelijking met eventuele externe eisen, of (bij ontbreken van externe kwantitatieve eisen) rechtstreeks ten opzichte van het gebruiksdoel;
- rapporteer de resultaten in een validatierapport.

3.1 SELECTIE VAN DE TE BEPALEN PRESTATIEKENMERKEN

Welke prestatiekenmerken bepaald dienen te worden, is vooral afhankelijk van de status van de analysemethode die men wenst uit te voeren.

Voor volledig nieuwe analysemethoden (d.w.z. door het laboratorium geheel zelf ontwikkeld en niet eerder gevalideerd) geldt dat een complete validatie is vereist. Deze omvat altijd de volgende prestatiekenmerken:

- werkgebied;
- juistheid;
- intra-reproduceerbaarheid;
- selectiviteit;
- robuustheid.

indien relevant omvat deze verder:

- aantoonbaarheids- en bepalingsgrens;
- herhaalbaarheid;
- lineariteit, of meer algemeen modelafwijking.

Meestal echter zullen laboratoria bij voorkeur de referentiemethoden overnemen. Dit zijn wettelijk vastgelegde of door de bevoegde overheid aanbevolen analysemethoden, vastgelegd in bijvoorbeeld een compendium of in internationale normen. Indien zulke analysemethode zonder wijzigingen wordt overgenomen, volstaat het in principe aan te tonen dat de essentiële prestatiekenmerken in overeenstemming zijn met de gedocumenteerde en/of met het gebruiksdoel. De uit te voeren validatie omvat dan minimaal:

- juistheid;
- intra-reproduceerbaarheid.

en indien relevant tevens:

- werkgebied;
- aantoonbaarheids- en bepalingsgrens;
- herhaalbaarheid;
- selectiviteit.

Voor een gewijzigde analysemethode, d.i. een analysemethode die reeds was gevalideerd maar waarin een verandering is aangebracht, is een hervalidatie nodig gericht op die prestatiekenmerken die redelijkerwijs door de verandering kunnen beïnvloed worden.

3.2 BEPALING VAN HET TOEPASSINGSGEBIED EN EVENTUELE DEELGEBIEDEN BIJ DE VALIDATIE

Prestatiekenmerken hebben slechts betekenis bij ondubbelzinnig gedefinieerde analyseobjecten en analyseresultaten. Als de analyseprocedure hierover onvoldoende duidelijkheid verschaft, dient voorafgaand aan de validatie een duidelijke interpretatie te worden opgesteld en opgenomen in het validatierapport. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aantal onderliggende metingen van een analyseresultaat (één of gemiddelde) en voor eventuele toegepaste correcties (voor extractiestandaarden, procedureblanco, ...). Ook het beoogde toepassingsgebied moet van tevoren worden gespecificeerd, nl. welke matrices (inclusief mogelijke interferenten) en welk werkgebied (eventueel per matrix).

Uitgangspunt is dat bij validatie gelijkaardige matrices zoveel mogelijk worden gecombineerd in één toepassingsgebied. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn verschillende deelgebieden (zowel qua matrix als werkgebied) te onderscheiden en afzonderlijk te valideren. De belangrijkste overweging hierbij is voorkennis van, of twijfel over, de effecten van bepaalde interferenten.

In bepaalde gevallen kan worden volstaan met een validatie in de “moeilijkste” matrix. Dit geldt enkel voor zover sprake is van een ondubbelzinnige gradatie, en dient zo nodig per prestatiekenmerk bekeken te worden. Zo kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van sterk matrixbelaste afvalwaters om een methode te valideren voor huishoudelijk en industrieel afvalwater, en dergelijke, en kan de op basis van zulke monsters bekomen precisie eventueel aangewend worden als een “worst case” waarde voor het betreffende concentratiebereik in andere watertypes zoals grondwater, oppervlaktewater en drinkwater.

Globaal wordt voor de afzonderlijk te beschouwen matrices bij de validatie van analysemethoden voor water en waterige oplossingen van milieumatrices volgende vuistregel vooropgesteld:

- drinkwater
- afvalwater
 - bijkomend dienen specifieke prestatiekenmerken in oppervlaktewater en/of grondwater onderzocht te worden, voor zover niet gedekt door de reeds gevalideerde matrices, tevens is aanvullend onderzoek met betrekking tot specifieke interferenten nodig voor zover van toepassing (bijvoorbeeld zeewater, zwembadwater,...)

3.3 OMGANG MET EXTERNE EISEN

Omdat de waarde van een prestatiekenmerk wordt verkregen door metingen, is hiermee een onzekerheid verbonden. Dit is vooral van belang wanneer moet getoetst worden of aan extern opgelegde absolute grenswaarden voldaan is. In dat geval moet aangetoond worden dat het prestatiekenmerk met een betrouwbaarheid van tenminste 95% voldoet aan de eis, met andere woorden dat de numerieke waarde van het prestatiekenmerk plus (resp. minus) de onzekerheid kleiner (resp. groter) is dan de bovengrens (resp. ondergrens).

Traditioneel worden externe eisen echter meestal als een zogenaamde geschatte grenswaarde beschouwd en kan worden volstaan met het rechtstreeks vergelijken van de numerieke waarde van het prestatiekenmerk met de grenswaarde.

In de regel geldt dat eventuele uitbijters in de verzamelde analyseresultaten alleen worden verwijderd als de oorzaak bekend is en deze niet de praktijksituatie weerspiegelt (bv. foutieve preparatie van een synthetisch monster, technisch defect meettoestel, ...).

3.4 KEUZE VAN DE MONSTERS VOOR EEN VALIDATIEONDERZOEK

Als algemene regel geldt dat de monsters zoveel mogelijk representatief moeten zijn voor het toepassingsgebied (of het deelgebied). In de verzameling validatiemonsters moeten dus de meest voorkomende matrices vertegenwoordigd zijn, op basis van inzicht in de relatieve aandelen van de verschillende monsters in de monsterstroom van het laboratorium. Eventueel kan de monsterselectie toegespitst worden op de "moeilijkste" matrix, rekening houdend met de onder punt 3.2 beschreven beperkingen.

Intra-reproduceerbaarheid, herhaalbaarheid, selectiviteit en robuustheid worden in principe bepaald op praktijkmonsters of monsters die hierop zoveel mogelijk gelijken (bijv. geaddeerde praktijkmonsters).

Voor validatie van de aantoonbaarheids- en bepalingsgrens gebruikt men, in volgorde van voorkeur, een praktijkmonster of representatief referentiemateriaal met gehalte nabij de verwachte aantoonbaarheidsgrens, een blanco praktijkmonster waaraan de te bepalen componenten werden geaddeerd tot een gehalte nabij de verwachte aantoonbaarheidsgrens, of een blanco praktijkmonster.

Voor validatie van de juistheid gebruikt men, in volgorde van voorkeur maar steeds de gelijkenis met praktijkmonsters voor ogen houdend:

- gecertificeerd referentiemateriaal en deelname aan interlaboratoriumtesten met herleidbare referentiewaarden, dit wil zeggen waarden gerelateerd aan een geschikte (bij voorkeur internationale) meetstandaard;
- geaddeerde praktijkmonsters waarvan de werkelijke waarde gebaseerd is op de gravimetrisch/volumetrisch toegevoegde hoeveelheid, deze kunnen zowel zelf aangemaakt zijn of deel uitmaken van een 'proficiency testing'; hierbij dient opgemerkt te worden dat additie-experimenten te optimistische resultaten kunnen opleveren omdat het toegevoegde deel van de component niet op dezelfde wijze in het monster opgenomen wordt als het oorspronkelijke deel;
- rondzendmonsters met een consensuswaarde (bijv. gemiddelde waarde uit 'proficiency testing' schema's) waarbij verschillende/gelijke methoden werden toegepast;
- niet-gecertificeerd referentiemateriaal en/of praktijkmonsters met een waarde die onafhankelijk is van het te valideren systeem, bijvoorbeeld bepaald met een andere methode waarvan de bias gekend is.

Voor de bepaling van de bias ten opzichte van een methodegemiddelde kan een gecertificeerd referentiemateriaal of een rondzendmonster met een consensuswaarde (bijvoorbeeld gemiddelde waarde uit ringtest) worden gebruikt, mits voor de berekening van de gecertificeerde waarde of consensuswaarde enkel meetresultaten, bekomen met dezelfde methode, werden verwerkt. Deze consensuswaarde kan verschillen van de werkelijke waarde.

Voor evaluatie van de lineariteit gebruikt men dezelfde matrix als bij de kalibratie (dit is meestal standaardoplossing, doch bij sommige technieken ook monster).

4 ALGEMENE PROCEDURE VOOR DE BEPALING VAN DE AFZONDERLIJKE PRESTATIEKENMERKEN

4.1 JUISTHEID

Hieronder worden eerst twee klassieke werkwijzen behandeld, nl. meervoudige analyse van een referentiemateriaal (met gekende ware waarde) en uitvoering van terugvindingsexperimenten op een geselecteerd monster.

Indien de juistheid slechts bij één concentratieniveau gevalideerd wordt, ligt dit bij voorkeur nabij de kritische waarde volgens de regelgeving, in het gebied tussen de typische waarden voor praktijkmonsters en deze kritische waarde. Bij onderzoek op meer dan één concentratieniveau (wat overigens aanbevolen wordt door Eurachem) kiest men deze tenminste een factor 10 uit elkaar.

Verder wordt een alternatieve werkwijze beschreven, namelijk evaluatie van de terugvinding en/of afwijking ten opzichte van de referentiewaarde voor verschillende monsters. Hierbij kan niet enkel de terugvinding van addities op verschillende monsters en/of verschillende concentratieniveau's gebruikt worden, maar eveneens resultaten bekomen via deelname aan 'proficiency testing' schema's (interlaboratoriumtesten), vergelijkende resultaten t.o.v. een referentiemethode, Deze werkwijze is vooral aangewezen indien er twijfel bestaat over het effect van diverse matrices binnen het toepassingsgebied (of desgevallend deelgebied) op de prestatiekenmerken juistheid en/of selectiviteit (matrixeffect).

Elk van de klassieke werkwijzen levert, naast informatie over de juistheid, simultaan informatie over de intra-reproduceerbaarheid van de analysemethode.

4.1.1 MEERVOUDIGE ANALYSE VAN EEN REFERENTIEMATERIAAL

Indien voor het toepassingsgebied (of desgevallend een deelgebied) een monster met een ware waarde of consensuswaarde beschikbaar is, voer dan hierop minstens 5 analyses (cfr. punt 2.12) uit, onder intra-reproduceerbaarheidsomstandigheden (op verschillende dagen, met weerspiegeling van typische laboratoriumomstandigheden qua uitvoerende analisten, kalibratie, ...). Bereken het gemiddelde van de bekomen meetwaarden. De bias wordt gegeven door:

$$b_{c(\text{rel})} = \frac{X_{\text{gem}} - C_{\text{ref}}}{C_{\text{ref}}} \times 100(\%) \quad (\text{in geval van een proportionele bias als } \%),$$

of

$$b_{c(\text{abs})} = X_{\text{gem}} - C_{\text{ref}} \quad (\text{in geval van een constante absolute bias}),$$

met:

$b_{c(\text{rel})}$	procentuele bias (bij een waarde c van de meetgrootheid)
$b_{c(\text{abs})}$	absolute bias (bij een waarde c van de meetgrootheid)
X_{gem}	gemiddelde waarde van de meetgrootheid
C_{ref}	ware waarde van het referentiemateriaal

De juistheid (uitgedrukt in %) wordt dan gegeven door $(100 + b_{c(\text{rel})})$.

De situatie van een constante absolute bias kan zich ondermeer voordoen in een laag concentratiegebied, bij een constante ongekende interferentie.

Indien binnen een bepaald toepassingsgebied op verschillende referentiematerialen dergelijke meervoudige analyse is uitgevoerd, wordt de juistheid bij voorkeur berekend door uit te middelen over de geanalyseerde afvalstoffen. Hierbij dient de zin van de afwijking (+ of -) mee in rekening te worden gebracht en dient desgevallend onderscheid gemaakt te worden tussen de situaties proportionele of constante absolute bias.

4.1.2 TERUGVINDINGSEXPERIMENTEN OP EEN GESELECTEERD MONSTER

Indien geen geschikt monster met een ware waarde of consensuswaarde beschikbaar is en de component op een representatieve manier aan het monster kan toegevoegd worden, is een terugvindingsexperiment de meest aangewezen benadering. Een nadeel hiervan is dat bepaalde systematische afwijkingen, bijvoorbeeld veroorzaakt door interferenties, niet kunnen worden vastgesteld.

Neem hiervoor minstens 10 deelmonsters (cfr. Punt 2.12) en voeg aan de helft een bekende hoeveelheid van de component zo representatief mogelijk toe, waardoor de meetgrootte met Δc wordt verhoogd. Richtlijnen met betrekking tot de werkwijze voor additie worden gegeven in BIJLAGE A.

Bepaal per monster de terugvinding uit het analyseresultaat voor het monster zonder en het monster met toevoeging van de component. Voer beide metingen zoveel mogelijk onder dezelfde omstandigheden uit, dit wil zeggen in dezelfde analysereeks. Voer minstens 5 dergelijke paren analyses onder intra-reproduceerbaarheidsomstandigheden uit (dit wil zeggen elk paar op een andere dag, met weerspiegeling van typische laboratoriumomstandigheden qua uitvoerende analisten, kalibratie, ...).

Bereken voor elk van de experimenten de terugvinding (uitgedrukt in %) als:

$$T_{\Delta c,i} = \frac{X_{c+\Delta c,i} - X_{c,i}}{\Delta c} \times 100(\%)$$

met:

$T_{\Delta c,i}$	procentuele terugvinding bij het i-de experiment (bij toevoeging Δc van de meetgrootte)
$X_{c+\Delta c,i}$	i-de analyseresultaat voor waarde c met additie Δc van de meetgrootte
$X_{c,i}$	i-de analyseresultaat voor waarde c van de meetgrootte
Δc	geaddeerde waarde van de meetgrootte

Bereken van de aldus bekomen terugvindingen de gemiddelde waarde $\overline{T}$, welke een maat is voor de juistheid, uitgedrukt in %. De procentuele bias kan berekend worden uit $b_{c,rel} = \overline{T} - 100$.

4.1.3 EVALUATIE VAN DE TERUGVINDING EN/OF AFWIJING TEN OPZICHTE VAN DE REFERENTIEWAARDE VOOR VERSCHILLENDE MONSTERS

Voor wat addities betreft, gelden bij deze methode dezelfde randvoorwaarden en beperkingen als beschreven onder punt 4.1.2.

Voeg aan een deelmonster van een reeds eerder geanalyseerd monster een bekende hoeveelheid van de component zo representatief mogelijk toe, waardoor de meetgrootte met Δc wordt verhoogd. Analyseer dit monster met additie in dezelfde meetreeks, zoveel mogelijk onder dezelfde omstandigheden als het oorspronkelijk monster. Voer in totaal 5-10 dergelijke terugvindingsanalyses uit op verschillende monsters en concentratieniveaus, er over wakend dat deze als geheel de praktijksituatie zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Voer de verschillende analyses op monsters met additie onder intra-reproduceerbaarheidsomstandigheden uit (op verschillende dagen, met weerspiegeling van typische laboratoriumomstandigheden qua uitvoerende analisten, kalibratie, ...).

Bereken voor elk van de minstens 5 experimenten de terugvinding (uitgedrukt in %) uit het analyseresultaat voor het monster zonder en het monster met toevoeging van de component (voor formule zie punt 4.1.2). Bereken van de aldus bekomen terugvindingen de gemiddelde waarde $\bar{T}$. De procentuele bias kan berekend worden uit $b_{c,rel} = \bar{T} - 100$.

Bij deze werkwijze kunnen, naast terugvindingen bekomen via een additie-experiment, eveneens terugvindingen afgeleid uit de deelname aan 'proficiency testing' schema's, uit vergelijking van de methode t.o.v. een referentiemethode, ..., gebruikt worden. Hierbij blijft het belangrijkste uitgangspunt het gebruik van verschillende monsters, waarbij deze qua matrix en concentratieniveau het toepassingsgebied zo goed mogelijk moeten dekken.

4.2 HERHAALBAARHEID EN INTRA-REPRODUCEERBAARHEID

De algemene procedure voor het bepalen van de prestatiekenmerken herhaalbaarheid en intra-reproduceerbaarheid is dezelfde, met uitzondering van de analysecondities bij de experimenten (cfr. punt 2.3 en 2.4). Voor intra-reproduceerbaarheid wordt minstens de factor tijd bijkomend gevarieerd (uitvoering van de herhalingsanalyses op verschillende dagen) en voor zover relevant ook andere bronnen van variatie (analist, apparaat, kalibratie, ...). De bedoeling is om een zo goed mogelijke afspiegeling van de praktijksituatie te bekomen.

Er zijn twee klassieke werkwijzen, namelijk herhaalde analyse van hetzelfde monster en duplo-analyse van verschillende monsters (zie punt 4.2.1 en 4.2.2). Eerstgenoemde benadering heeft als nadeel dat de informatie sensu strictu beperkt blijft tot dat ene monster. Anderzijds geldt bij laatstgenoemde benadering in principe de beperkende voorwaarde dat óf de standaardafwijking óf de variatiecoëfficiënt niet mag afhangen van de waarde van de meetgrootte, wat vaak eveneens tot een klein meetbereik leidt.

Indien, volgens eerstgenoemde werkwijze, de precisie slechts bij één concentratieniveau gevalideerd wordt, ligt dit bij voorkeur nabij de kritische waarde volgens de regelgeving, in het gebied tussen de typische waarden voor praktijkmonsters en deze kritische waarde. Bij onderzoek op meer dan één concentratieniveau (wat overigens voor herhaalbaarheidsonderzoek aanbevolen wordt door Eurachem) kiest men deze tenminste een factor 10 uit elkaar.

In praktijk zal een analysemethode, na ingebruikname, meestal ook opgevolgd worden aan de hand van een relevant controlemonster, zodat voor periodieke herevaluatie van de intra-reproduceerbaarheid ook de resultaten van deze eerstelijnscontrole als input gebruikt kunnen worden.

4.2.1 MEERVOUDIGE ANALYSE VAN HETZELFDE MONSTER

Voer op een volgens de aanbevelingen in punt 3.4 gekozen monster, desgevallend per deelgebied, minstens 5 analyses (cfr. punt 2.12) uit onder herhaalbaarheidscondities, respectievelijk intra-reproduceerbaarheidscondities. Bereken hieruit de herhaalbaarheidsstandaardafwijking s_r , respectievelijk intra-reproduceerbaarheidsstandaardafwijking s_R , als:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

s = standaardafwijking, in eenheid analyseresultaat
 n = aantal analyses, $n \geq 5$
 x_i = i-de analyseresultaat
 $\bar{x}$ = gemiddelde van n analyseresultaten

Bij gebrek aan een geschikt monster kan eventueel gebruik gemaakt worden van een praktijkmonster waaraan een gepaste hoeveelheid van de component is geaddeerd, dit voor zover de geaddeerde component zoveel mogelijk op dezelfde wijze in het monster opgenomen is als de component van het praktijkmonster. Voor richtlijnen met betrekking tot additie wordt verwezen naar BIJLAGE A.

4.2.2 DUPLO-ANALYSE VAN VERSCHILLENDE MONSTERS

Kies de grootte van het (deel)gebied zo dat redelijkerwijs mag worden verondersteld dat óf de standaardafwijking óf de variatiecoëfficiënt van de analyseresultaten niet afhangt van de waarde van de meetgrootte. Veelal neigt de spreiding ruim boven de aantoonbaarheidsgrens naar proportionaliteit en mag in dit deel van het werkgebied de variatiecoëfficiënt constant verondersteld worden. Nabij de aantoonbaarheidsgrens mag daarentegen de standaardafwijking veelal constant verondersteld worden (cfr. punt 2.10).

Gebruik monsters volgens de aanbevelingen in punt 3.4. Analyseer (cfr. punt 2.12), desgevallend per deelgebied, minstens 5 verschillende monsters in duplo. Bij het herhaalbaarheidsonderzoek dienen beide analyses van een paar onder herhaalbaarheidscondities uitgevoerd te worden. De verschillende monsters worden wel bij voorkeur op verschillende dagen geanalyseerd. Bij het intra-reproduceerbaarheidsonderzoek mogen beide analyses van een paar niet op dezelfde dag uitgevoerd worden en dient het geheel gespreid te worden over tenminste evenveel dagen als het aantal monsterparen.

Als voor het betreffende meetbereik de standaardafwijking onafhankelijk mag worden verondersteld van de waarde van de meetgrootte (homogeniteit van de varianties), dan mogen de n standaardafwijkingen uit duplo's worden samengevoegd en kan s_r , resp. s_R , berekend worden als (NEN 7777: 2011; AP 04 SG: 1998):

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_{i1} - x_{i2})^2}{2n}}$$

s = standaardafwijking, in eenheid analyseresultaat
 n = aantal monsters in duplo geanalyseerd, $n \geq 5$
 x_{i1} = eerste analyseresultaat van een duplo-analyse op monster i
 x_{i2} = tweede analyseresultaat van een duplo-analyse op monster i

Als voor het betreffende meetbereik de variatiecoëfficiënt onafhankelijk mag worden verondersteld van de waarde van de meetgrootte, dan mogen de n variatiecoëfficiënten uit duplo's worden samengevoegd en kan de variatiecoëfficiënt CV_r , resp. CV_R , worden berekend uit de genormaliseerde verschillen als (NEN 7777: 2011; AP 04 SG: 1998):

$$CV = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{x_{i1} - x_{i2}}{0.5(x_{i1} + x_{i2})} \right)^2}{2n}} \times 100(\%)$$

CV = variatiecoëfficiënt, in %
 n = aantal monsters in duplo geanalyseerd, $n \geq 5$
 x_{i1} = eerste analyseresultaat van een duplo-analyse op monster i
 x_{i2} = tweede analyseresultaat van een duplo-analyse op monster i

4.3 SELECTIVITEIT EN ROBUUSTHEID

Afzonderlijke selectiviteitsproeven zijn enkel zinvol in die gevallen waarbij de invloed onvoldoende wordt afgedekt door een ander prestatiekenmerk zoals juistheid. Experimenten hieromtrent situeren zich vaak eerder in het ontwikkelingsstadium van een analysemethode dan in het validatiestadium.

Kies om het effect van een bepaalde invloedsgrootte te onderzoeken zo mogelijk een praktijkmonster, volgens de aanbevelingen in punt 3.4. Voeg aan verschillende deelmonsters een telkens toenemende hoeveelheid van de invloedsgrootte toe, zo representatief mogelijk en met minimale verdunning als gevolg. Analyseer de aldus bekomen monsters onder herhaalbaarheidscondities en bepaal de verandering van het analyseresultaat als gevolg van een verandering van de waarde van de invloedsgrootte. Al naargelang de voorkennis kan het noodzakelijk zijn om bovenvermelde proef uit te voeren in het onderste en bovenste deel van het werkgebied.

In geval er geen enkele voorkennis is met betrekking tot interferenten en er geen referentiematerialen beschikbaar zijn, kan de selectiviteit als volgt onderzocht worden:

- het analyseren van praktijkmonsters met de betreffende analysemethode en met een andere onafhankelijke analyse- of meetmethode (ander scheidings- en/of detectieprincipe);
- het analyseren van opeenvolgende, steeds grotere, verdunningen van praktijkmonsters (op voorwaarde dat de te bepalen component in voldoende hoge concentratie aanwezig is om nog in verdunning gemeten te kunnen worden).

Robuustheid is impliciet begrepen in de intra-reproduceerbaarheid, en zal meestal evenmin een specifieke validatie behoeven. De verhouding tussen intra-reproduceerbaarheid en herhaalbaarheid kan worden gehanteerd als een maat voor (het gebrek aan) robuustheid. In het ideale geval zou deze verhouding 1 moeten bedragen, maar in praktijk zijn verhoudingen tot 1.5 tot 2 niet ongewoon.

Eventuele specifieke experimenten, gericht op de verandering van het analyseresultaat als gevolg van een verandering van de uitvoeringsomstandigheden, kunnen op gelijkaardige wijze opgezet worden als hierboven beschreven voor selectiviteitsonderzoek. Meestal zal het programma voor eerstelijns kwaliteitscontrole zodanig ontworpen worden dat de meest kritische variabelen, namelijk de variabelen met het grootste effect op de juistheid en precisie, expliciet gecontroleerd worden.

4.4 AANTOONBAARHEIDSGRENS EN BEPALINGSGRENS

In deze procedure wordt de aantoonbaarheidsgrens (AG) geoperationaliseerd als 3 maal de standaardafwijking op laag niveau (cfr. punt 2.7) en dit onder intra-reproduceerbaarheidscondities.

Hieronder worden twee benaderingen beschreven, nl. meervoudige analyse van een praktijkmonster met gehalte nabij de aantoonbaarheidsgrens en de duplo-analyse van verschillende praktijkmonsters met gehalte nabij de aantoonbaarheidsgrens.

Eerstgenoemde werkwijze is de meest klassieke maar heeft als nadeel dat de onzekerheid die het gevolg is van de aanwezigheid van interferenten in monsters, verschillende matrixeffecten en dergelijke niet gedekt wordt. Daarom kan de eigenlijke aantoonbaarheidsgrens onder praktijkomstandigheden hoger zijn. Deze beperking wordt enigszins ondervangen door de tweede werkwijze.

De bepalingsgrens wordt op dezelfde manier ingeschat, doch op basis van 6 maal de standaardafwijking.

Met de term 'gehalte nabij de aantoonbaarheidsgrens' (of 'laag gehalte') wordt een gehalte bedoeld dat bij voorkeur in het bereik tussen ca. 1 en 5 maal de aantoonbaarheidsgrens ligt en dat niet meer dan 10 maal de aantoonbaarheidsgrens bedraagt. Indien een parametergroep een groot aantal componenten (bijvoorbeeld >10) bevat kan het praktisch moeilijk zijn om een monster te vinden dat voor elke component ideaal is. In dergelijk geval mag voor enkele componenten van bovenvermelde beperking qua concentratiebereik afgeweken worden of mag de aantoonbaarheidsgrens geëxtrapoleerd worden uit soortgelijke componenten.

4.4.1 MEERVOUDIGE ANALYSE VAN EEN PRAKTIJKMONSTER MET LAAG GEHALTE

Gebruik hiervoor een monster volgens de aanbevelingen in punt 3.4. Analyseer het monster strikt volgens de gebruikelijke analyseprocedure (cfr. Punt 2.12). Analyseer het monster na één of meerdere dagen opnieuw, en vervolg dit totdat tenminste 5 analyseresultaten zijn verkregen. Voer de proeven zo uit dat het geheel de praktijksituatie (qua uitvoerende analisten, omgevingsomstandigheden, volgnummer in reeks, ...) weerspiegelt.

Bereken de standaardafwijking s_R uit de analyseresultaten en hieruit de aantoonbaarheidsgrens $AG_R = 3 s_R$.

Verhoog de waarde van de aantoonbaarheidsgrens met de gemiddelde waarde van de procedureblanco indien deze meetbaar is en een correctie voor de procedureblanco geen deel uitmaakt van de gebruikelijke analyseprocedure.

Wanneer verschillende praktijkmonsters met laag gehalte meervoudig geanalyseerd werden, wordt de hoogste van de bekomen waarden als uiteindelijke maat voor de aantoonbaarheidsgrens en bepalingsgrens, gehanteerd.

4.4.2 DUPLO-ANALYSE VAN VERSCHILLENDE PRAKTIJKMONSTERS MET LAAG GEHALTE

Gebruik monsters volgens de aanbevelingen in punt 3.4. Analyseer (cfr. punt 2.12) minstens 5 verschillende monsters in duplo, voer beide analyses van een paar niet op dezelfde dag uit en spreid het geheel over tenminste evenveel dagen als het aantal monsterparen.

Bereken s_R als (cfr. punt 4.2.2):

$$s_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_{i1} - x_{i2})^2}{2n}}$$

- s_R = intra-reproduceerbaarheidsstandaardafwijking, in eenheid analyseresultaat
 n = aantal monsters in duplo geanalyseerd, $n \geq 5$
 x_{i1} = eerste analyseresultaat van een duplo-analyse op monster i
 x_{i2} = tweede analyseresultaat van een duplo-analyse op monster i

Bereken hieruit de aantoonbaarheidsgrens $AG_R = 3 s_R$.

Verhoog de waarde van de aantoonbaarheidsgrens met de gemiddelde waarde van de procedureblanco indien een correctie voor de procedureblanco geen deel uitmaakt van de gebruikelijke analyseprocedure.

4.5 LINEARITEIT - MODELAFWIJKING

Bij de bepaling van de alineariteit, of meer algemeen de modelafwijking ('lack-of-fit'), wordt de experimentele afwijking ten opzichte van het kalibratiemodel gekwantificeerd. Veelal betreft deze enkel het instrumentele gedeelte van de analyse. Hiervoor kunnen in praktijk de experimentele meetwaarden van een kalibratie gebruikt worden.

Leg het kalibratiemodel vast aan de hand van tenminste 6 verschillende concentratieniveau's, gespreid over het gehele werkgebied. Aanbevolen wordt om bij het validatieonderzoek eenmalig elk concentratieniveau in drievoud te meten, zodat kan nagegaan worden hoe de variantie van herhalingsmetingen varieert met de concentratie.

Voer op de bekomen resultaten een gepaste regressie-analyse uit. Indien er een proportioneel verband is tussen de variantie van herhalingsmetingen en de concentratie wordt best een gewogen regressie toegepast. Het louter gebruiken van een correlatiecoëfficiënt ter bepaling van de lineariteit wordt afgeraden omdat dit een maat is voor de correlatie, niet voor de lineariteit. Het weerhouden kalibratiemodel moet uiteraard ook gehanteerd worden bij de verdere praktijktoepassing van de analysemethode.

Bereken de modelafwijking voor een waarde c van de meetgrootheid als:

$$\delta_{c, \text{model}} = X_{c, \text{exp}} - X_{c, \text{model}}$$

met:

$X_{c, \text{exp}}$ experimentele meetwaarde of desgevallend de gemiddelde waarde van de herhalingsmetingen bij een waarde c van de meetgrootheid

$X_{c, \text{model}}$ berekende meetwaarde welke volgens het kalibratiemodel bekomen wordt voor een waarde c van de meetgrootheid

Zet de modelafwijkingen grafisch uit in functie van de meetgrootheid en verifieer of deze random verdeeld zijn, systematische trends wijzen op non-lineariteit. Grote procentuele afwijkingen zijn niet noodzakelijk een indicatie voor alineariteit, maar verdienen niettemin speciale aandacht omdat ze tot een slechte intra-reproduceerbaarheid en hoge meetonzekerheid kunnen leiden. Alternatief kan men de responsfactoren $RF_c = X_c / c$ (of relatieve responsfactoren, bij gebruik van een interne standaard) uitzetten en toetsen ten opzichte van een vastgelegde eis. Meestal houdt zulke eis rekening met de aard van de bepalingmethode.

Een tweede mogelijkheid is de kalibratiegegevens enerzijds met een lineair model en anderzijds met een kwadratisch model te evalueren (ISO 8466-1, 1990). Uit beide modellen wordt de residuele standaardafwijking s_{y1} en s_{y2} verkregen. Het verschil van de varianties DS^2 wordt als volgt berekend:

$$DS^2 = (N-2)s_{y1}^2 - (N-3)s_{y2}^2$$

met:

N het aantal concentratieniveaus ($N \geq 6$)
 s_{y1}^2 residuele standaardafwijking bij lineair model
 s_{y2}^2 residuele standaardafwijking bij kwadratisch model
 het aantal vrijheidsgraden f is 1.

Vervolgens worden DS^2 en de variantie van de kwadratische kalibratiefunctie aan een F-test onderworpen om na te gaan of er significante verschillen bestaan. De testwaarde, F_{ber} , wordt bekomen uit:

$$F_{ber} = \frac{DS^2}{s_{y2}^2}$$

Indien $F_{ber} \leq F_{tabel}$, dan leidt de kwadratische functie niet tot een significant beter model, met andere woorden is de kalibratiefunctie lineair.

Indien $F_{ber} > F_{tabel}$, dan wordt het werkgebied verkleind om een lineaire kalibratiefunctie te verkrijgen, ofwel worden de meetwaarden van monsters met de kwadratische functie geëvalueerd.

Een derde mogelijkheid, weliswaar minder fundamenteel, is de berekening van een kwadratische functie, waarna gebruik gemaakt wordt van een t-test om te beoordelen of de coëfficiënt van de kwadratische term significant afwijkt van 0.

Bij vaststelling van een niet-lineair verband wordt aanbevolen om na te gaan hoe relevant het verschil is tussen een resultaat bekomen met een lineaire functie en met een kwadratische functie. Indien dit klein is vergeleken met de meetonzekerheid kan overwogen worden om toch met de lineaire vergelijking door te gaan en de corresponderende fout mee te verrekenen in de globale meetonzekerheid.

4.6 WERKGEBIED

De ondergrens van het werkgebied van een kwantitatieve analysemethode ligt in principe op of boven de bepalingsgrens en binnen het gebied waarvoor de lineariteit werd aangetoond.

Als vuistregel (streefwaarde) wordt in het kader van deze procedure vooropgesteld dat de rapportagegrens, de waarde beneden welke een component als niet kwantificeerbaar ('<') wordt gerapporteerd, hoogstens een vijfde van de toetsingswaarde of normwaarde voor de gemeten

monsters bedraagt, tenzij niet haalbaar volgens de huidige stand der techniek². Dit geldt zowel in geval de bepalingsgrens als rapportagegrens fungeert, als in geval van het systematisch gebruik van een rapportagegrens die hoger ligt dan de bepalingsgrens.

Wanneer het snijpunt van de kalibratielijns met de Y-as niet significant verschillend is van nul kan het werkgebied uitgebreid worden tot onder het concentratieniveau van de laagste kalibratiestandaard en tot de bepalingsgrens. In het andere geval wordt aanbevolen de laagste kalibratiestandaard als ondergrens van het werkgebied te beschouwen.

In bepaalde gevallen kan het aangewezen zijn om ook waarden tussen de aantoonbaarheidsgrens en de bepalingsgrens te rapporteren, omdat er wel degelijk informatie in zulke waarden kan zitten zodra over een aantal uitslagen wordt uitgemiddeld. Dergelijke werkwijze dient duidelijk te blijken uit het analyseverslag, bijvoorbeeld door de vermelding van de meetwaarden samen met de bepalingsgrens. Met betrekking tot de in eerste alinea beschreven vuistregel is het onverminderd de bepalingsgrens die aan het criterium moet getoetst worden.

In de meeste gevallen is het werkgebied tot boven het lineair gebied uit te breiden door verdunning van het monster of door minder monster in bewerking te nemen. Beperkende factoren voor de bovengrens zijn mogelijk, al naargelang de analysemethode, het optreden van geheugeneffecten, de capaciteit van bepaalde voorbereidingsstappen, ...

5 REFERENTIES

- Anal. Chim. Acta (1997), Hartmann *et al.*, nr 338, p. 19-40.
- AOAC Peer Verified Methods Program – Manual on Policies and Procedures, AOAC International, Arlington VA 22201-3301, USA.
- Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen - Onderdeel: Samenstelling Grond, versie 9.2a, oktober 2011.
- EPA, 'Definition and procedure for the determination of the method detection limit', revision 1.11, juli 2011.
- Eurachem (2014), *The Fitness for Purpose of Analytical Methods: A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics: Second edition*.
- Eurachem/CITAC (2012), *Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, 3rd Edition*.
- IUPAC (1995), Nomenclature in Evaluation of Analytical Methods, Including Detection and Quantification Capabilities, IUPAC Recommendations 1995, Pure and Appl. Chem., 1995, 67, 1699 – 1723.
- ISO 3534-1 (2006) Statistics -- Vocabulary and symbols -- Part 1: General statistical terms and terms used in probability.
- ISO 5725-1 to -6 (1994), 'Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results'.
- ISO 8466-1 (1990), 'Water quality – Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics: Part 1 – Statistical evaluation of the linear calibration function', 1st Edition 1990 (E).
- ISO 9169 (2006) Air quality -- Definition and determination of performance characteristics of an automatic measuring system.

² In voorkomend geval wordt dit in de betreffende WAC-procedure en/of in een rapport van LNE of het referentielaboratorium duidelijk aangegeven.

- ISO GUM (2008) Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement
- NEN 7777 (2011), 'Milieu en voedingsmiddelen - Prestatiekenmerken van meetmethoden'.
- Pharmaceutisch Weekblad (1992), 'Richtlijnen voor analytische validatie', van de Vaart, nr. 46, p. 1229-1235.
- RIVM (1994), 'Prestatiekenmerken voor meetmethoden. Termen, definities en testprocedures ten behoeve van het Accreditatieprogramma Normalisatie en Validatie van Milieumeetmethoden', van de Wiel et al., Rapportnr. 219101004.

BIJLAGE A RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT ADDITIE

A.1 ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR ADDITIE

De additie van de component gebeurt proportioneel. Er wordt optimaal tussen 50% en 200% van de in het oorspronkelijk monster aanwezige hoeveelheid toegevoegd.

Het concentratieverschil dient voldoende groot te zijn in verhouding tot de beoogde meetonzekerheid, zonder evenwel de gelijkenis met praktijkmonsters in het gedrang te brengen.

De additie dient zodanig te gebeuren dat er minimale verdunning van het monster (behoud van matrix) optreedt. De verdunning bedraagt bij voorkeur niet meer dan 1% (m/m, v/v of v/m).

De additie dient zodanig uitgevoerd te worden dat de meetonzekerheid op het monster en het geaddeerd monster vergelijkbaar blijven (met behulp van voldoende betrouwbare standaardoplossing, ...).

A.2 SPECIEFIEKE RICHTLIJNEN VOOR ADDEREN VAN VERSCHILLENDE MATRICES VOOR ORGANISCHE PARAMETERS

A.2.1 Adderen aan vloeistoffen

Waterige oplossingen

Indien de componenten voldoende goed oplossen in water (bijv. fenolen, polaire pesticiden, ...) wordt in het monster een klein volume ($< 0,1\%$ v/v) met een gekende hoeveelheid van de te bepalen stoffen gebracht. Deze stoffen dienen opgelost in een met water mengbaar oplosmiddel (methanol, 2-propanol, aceton, ...). Homogeniseer het monster.

Indien het componenten betreft die niet goed in water oplossen, brengt men in het geval van een vloeistof/vloeistof extractie eerst het monster over naar een scheitrechter en voert men nadien de additie ($< 0,1\%$ v/v) uit. Wederom zijn de componenten in een met water mengbaar oplosmiddel opgenomen. Spoel de monsterrecipiënten na met het voor de extractie te gebruiken oplosmiddel.

Een andere mogelijkheid is het toevoegen van een additief waarmee de apolaire componenten in de matrix worden gehouden (bijvoorbeeld: 2-propanol, detergents, ...). In dit geval kan men werken zoals voor polaire verbindingen aangegeven.

BIJLAGE B MINIMALE EISEN MET BETREKKING TOT BEPALINGSGRENZEN

De erkende laboratoria en de VITO hebben in het kader van de ISO 17025 prestatiekenmerken afgeleid voor de parameters die onder de erkenning vallen. Door de VITO werden deze verzameld en verwerkt. Er is bij de verwerking vanuit gegaan dat deze data eveneens de monstervoorbehandeling omvatten. Bij het afleiden van de prestatie-eisen werd geëvalueerd wat in het kader van de wetgeving vereist is en wat analytisch haalbaar is. De resultaten werden besproken in de werkgroepen anorganische en organische parameters.

Indien bij de analyse de minimale bepalingsgrens niet kan gehaald worden, moeten aanpassingen aan de analysegang ervoor zorgen dat de minimale bepalingsgrens toch bereikt wordt. Deze aanpassingen worden op het analyserapport vermeld. Als de minimale bepalingsgrens ondanks de aanpassingen niet kan gehaald worden, wordt de verhoogde bepalingsgrens gerapporteerd samen met de doorgevoerde aanpassingen.

Opm.: De in de onderstaande tabellen opgenomen bepalingsgrenzen zijn deze die met de in dit compendium opgenomen methoden haalbaar zijn. Voor een aantal parameters (o.a. van de Kaderrichtlijn Water) zijn de WAC-methoden niet toereikend om de gewenste bepalingsgrens te halen. In dat geval dienen meer performante, bij voorkeur genormeerde methoden aangewend te worden.

B.1 ANORGANISCHE PARAMETERS

Toelichting legende:

- AW: afvalwater
- OW: oppervlaktewater
- GW: grondwater
- DW: drinkwater
- MKN: milieukwaliteitsnorm
- NM: normwaarde
- LOD: limit of determination (aantoonbaarheidsgrens)
- LOQ: limit of quantification (bepalingsgrens)

Tabel 1: Afvalwater (AW) – anorganische parameters

<i>Parameter (AW)</i>	<i>Eenheid</i>	<i>Rapportagegrens Vlarem II Bijlage 4.2.5.2 (vanaf 5/9/2016)</i>
Organoleptische parameters		
kleur	ΔE*ab	
Elementen		
aluminium	µg/l	100
antimoon	µg/l	30
arseen	µg/l	5
barium	µg/l	21
beryllium	µg/l	1

Parameter (AW)	Eenheid	Rapportagegrens Vlarem II Bijlage 4.2.5.2 (vanaf 5/9/2016)
boor	µg/l	210
cadmium	µg/l	0.8
cerium	µg/l	100
chromium	µg/l	15
fosfor	µg/l	300
ijzer	µg/l	100
kobalt	µg/l	0.6
koper	µg/l	15
kwik	µg/l	0.15
lood	µg/l	15
mangaan	µg/l	20
molybdeen	µg/l	105
nikkel	µg/l	9
seleen	µg/l	5
tellurium	µg/l	30
thallium	µg/l	1
tin	µg/l	12
titanium	µg/l	30
uranium	µg/l	0.5
vanadium	µg/l	5
zilver	µg/l	1
zink	µg/l	60
Anionen		
chloride	mg/l	25
sulfaat	mg/l	25
nitraat	mg/l (mg N/l)	0.5 (0.1)
nitriet	mg/l (mg N/l)	0.1 (0.03)
totaal orthofosfaat	mg/l (mg P/l)	0.15 (0.05)
fluoride	0,2 mg/l	0.2
vrije cyanide	0,01 mg/l	0.01
opgelost sulfide	0,2 mg/l	0.2
zuur milieu oplosbare sulfide	0,2 mg/l	0.2
chromium VI	0,01 mg/l	0.01
vrije chloor	0,1 mg/l	0.1
totaal chloor	mg/l	0.1
Groepsparameters		
bezinkbare stoffen	ml/l	0.1
zwevende stoffen	mg/l	2
BZV	mg O2/l	3

<i>Parameter (AW)</i>	<i>Eenheid</i>	<i>Rapportagegrens Vlarem II Bijlage 4.2.5.2 (vanaf 5/9/2016)</i>
CZV	mg O ₂ /l	7
Kjeldahl stikstof	mg/l	2
totaal stikstof	mg/l	2
TON	mg N/l	0.2
totaal cyanide	mg/l	0.01
TOC/DOC/NPOC/NPDOC	mg/l	10
Kationen		
ammonium	mg/l	0.25

Tabel 2: Oppervlaktewater (OW) – anorganische parameters

<i>Parameter (OW)</i>	<i>Eenheid</i>	<i>Vlarem II Bijlage 2.3.1 art 3 (laagste MKN)</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}/ Rapportagegrens</i>
Elementen (totaal)*				
antimoon	µg/l	100	30	30
arseen	µg/l	5	1.5	2.5
barium	µg/l	70	21	21
beryllium	µg/l	0.1	0.03	0.5
boor	µg/l	700	210	210
cadmium	µg/l	0.8	0.24	0.4
chroom	µg/l	50	15	15
kobalt	µg/l	0.6	0.18	0.3
koper	µg/l	50	15	15
kwik	µg/l	0.3	0.09	0.15
lood	µg/l	50	15	15
molybdeen	µg/l	350	105	105
nikkel	µg/l	30	9	9
seleen	µg/l	3	0.9	3
tellurium	µg/l	100	30	30
thallium	µg/l	0.2	0.06	0.5
tin	µg/l	40	12	12
titanium	µg/l	100	30	30
uranium	µg/l	1	0.3	0.3
vanadium	µg/l	5	1.5	2.5
zilver	µg/l	0.4	0.12	0.4
zink	µg/l	200	60	60
Elementen (opgelost)*				

<i>Parameter (OW)</i>	<i>Eenheid</i>	<i>Vlarem II Bijlage 2.3.1 art 3 (laagste MKN)</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}/ Rapportagegrens</i>
antimoon	µg/l	100	30	10
arseen	µg/l	3	0,9	0,9
barium	µg/l	60	18	10
beryllium	µg/l	0,08	0,024	0,1
boor	µg/l	700	210	100
cadmium	µg/l	0,08	0,024	0,1
chroom	µg/l	5	1,5	1,5
kobalt	µg/l	0,5	0,15	0,15
koper	µg/l	7	2,1	3,5
kwik	µg/l	0,07	0,021	0,07
lood	µg/l	1,2	0,36	1,2
molybdeen	µg/l	340	102	10
nikkel	µg/l	4	1,2	1,2
seleen	µg/l	2	0,6	1
tellurium	µg/l	100	30	10
thallium	µg/l	0,2	0,06	0,1
tin	µg/l	3	0,9	0,9
titanium	µg/l	20	6	6
uranium	µg/l	1	0,3	0,3
vanadium	µg/l	4	1,2	1,2
zilver	µg/l	0,08	0,024	0,1
zink	µg/l	20	6	6
Thermische omstandigheden				
temperatuur	°C	25		
impact thermische lozing	°C			
Zuurstofhuishouding				
opgeloste zuurstof (concentratie)	mg O ₂ /l	6	1.8	0.3
opgeloste zuurstof (verzadiging)	%	120	36	
biochemisch zuurstofverbruik (BZV)	mg O ₂ /l	6	1.8	2
chemisch zuurstofverbruik (CZV)	mg O ₂ /l	30	9	7
Zoutgehalte				
elektrische geleidbaarheid	µS/cm	100	30	
chloride	mg/l	20	6	6
sulfaat	mg SO ₄ /l	15	4.5	4.5
Verzuringstoestand				
zuurtegraad (pH)	Sörensen	4.5	1.35	
Nutriënten				

<i>Parameter (OW)</i>	<i>Eenheid</i>	<i>Vlarem II Bijlage 2.3.1 art 3 (laagste MKN)</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}/ Rapportagegrens</i>
ammoniak	µg/l	30	9	
nitriet	µg N/l	200	60	60
totaal cyanide	µg/l	50	15	15
fluoride	µg/l	900	270	270
Kjeldahl-stikstof	mg N/l	6	1.8	1.8
nitraat	mg N/l	5.65	1.695	1.7
totaal stikstof	mg N/l	1	0.3	0.5
totaal fosfor	mg P/l	0.14	0.042	0.07
orthofosfaat	mg P/l	0.07	0.021	0.05
nitraat+nitriet+ammonium	mg N/l	0.49	0.147	
Diversen				
zwevende stoffen	mg/l	50	15	15

*LOQ_{max} waarden voor de elementen (totaal en opgelost) moeten worden afgeleid zoals beschreven in WAC/III/B/010, WAC/III/B/011 en/of WAC/III/B/014.

Tabel 3: Grondwater (GW) – anorganische parameters

Parameter	Eenheid	Vlarem II Bijlage 2.4.1 MKN	Vlarem II Bijlage 2.4.1 Min. AGW	Vlarem II Bijlage 2.4.1 Min. DW	30% NW* (MKN/AGW/D W) cfr 2009/90/EC	LOQ _{max} / Rapportag egrens
Fysisch-chemische parameters						
elektrische geleidbaarheid (bij 20°C)	µs/cm	1600	<u>480</u>	1000	150	150
chloride	mg/l	250	<u>35</u>	140	10	10
sulfaat	mg/l SO ₄	250	<u>51</u>	150	15	15
calcium	mg/l	270	<u>51</u>		15	15
magnesium	mg/l	50	<u>8.3</u>		2.5	2.5
natrium	mg/l	150	<u>18</u>		6	6
kalium	mg/l	12	<u>4.1</u>	8	1.2	1.2
aluminium	mg/l	0.2	<u>0.06</u>		0.02	0.02
Parameters voor ongewenste stoffen						
nitraat	mg/l NO ₃ ⁻	<u>50</u>			15	15
nitriet	mg/l NO ₂ ⁻	0.1	0.07	<u>0.07</u>	0.021	0.035
ammonium	mg/l NH ₄ ⁺	0.5	0.47	<u>0.35</u>	0.105	0.175
boor	µg/l	<u>1000</u>	39		300	300
ijzer	mg/l	<u>20</u>	1.1		6	6
mangaan	mg/l	<u>1</u>	0.07		0.3	0.3
koper	µg/l	<u>100</u>	5		30	30
zink	µg/l	500	17	<u>260</u>	78	78
fosfaat	mg/l PO ₄	1.34	0.31	<u>0.83</u>	0.249	0.25
fluoride	mg/l	1.5	0.2	<u>0.8</u>	0.24	0.24
barium	mg/l	<u>1</u>			0.3	0.3
Parameters voor toxische stoffen						
arseen	µg/l	20	6	<u>10</u>	3	3
cadmium	µg/l	5		<u>2.5</u>	0.75	0.75
cyanide	µg/l	<u>50</u>			15	15
chrom	µg/l	<u>50</u>	12		15	15
kwik	µg/l	<u>1</u>			0.3	0.3
nikkel	µg/l	40	6	<u>20</u>	6	6
lood	µg/l	20		<u>10</u>	3	3
antimoon	µg/l	<u>10</u>			3	3
seleen	µg/l	<u>10</u>			3	3
kobalt	µg/l	-	-	-		0.3**

NW: normwaarde, MKN: milieukwaliteitsnorm, AGW: achtergrondwaarde, DW: drempelwaarde (VLAREM II, versie 2016)

*Onderlijnde normwaarden (MKN, AGW, DW) zijn weerhouden voor het berekenen van de 30% normwaarde.

**Richtwaarde gezien geen normwaarde gedefinieerd is in VLAREM II

Tabel 4: Drinkwater (DW) – anorganische parameters

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>DW richtlijn* Normwaarde 2023</i>	<i>Eis LOQ % van normwaarde</i>	<i>LOQ_{max}/ Rapportagegrens 2023</i>
Algemeen				
Geleidingsvermogen voor elektriciteit	µS/cm bij 20°C	2100 -2500 en geen abnormale verandering	30	630 -750
Waterstofionen-concentratie	pH-eenheden	≥ 6.5 en ≤ 9.2 -9.5		
Elementen	2			
Aluminium	µg/l	200	30	60
Antimoon	µg/l	5.0 10	30	1.5 3
Arseen	µg/l	10	30	3
Boor	mg/l	1.0 -1.5	30	0.3 -0.45
Cadmium	µg/l	5.0	30	1.5
Chroom	µg/l	50/ 25 ⁽¹⁾	30	15/ 7.5
Ijzer	µg/l	200	30	60
Koper	mg/l	2.0	30	0.6
Kwik	µg/l	1.0	30	0.3
Lood	µg/l	10/ 5 ⁽²⁾	30	3/ 1.5
Mangaan	µg/l	50	30	15
Natrium	mg/l	200	30	60
Nikkel	µg/l	20	30	6
Seleen	µg/l	10 -20	30	3 6
Uraan	µg/l	30	30	9
Zink	µg/l	5000⁽³⁾	30	60
Anionen				
Bromaat	µg/l	10	30	3
Chloride	mg/l	250	30	75
Fluoride	mg/l	1.5	30	0.45
Nitraat	mg/l	50	30	15
Nitriet	mg/l	0.10 0.50	30	0.03 0.15
Sulfaat	mg/l	250	30	75
Vrije chloorresten	µg/l	250	30	75
Chloriet	mg/l	0.70 0.25	30	0.075
Chloraat	mg/l	0.70 0.25	30	0.075
Perchloraat	µg/l	13	30	4
Groepsparameters				
Oxideerbaarheid	mg/l O ₂	5.0	30	1.5
Cyanide	µg/l	50	30	15
Organische koolstof totaal (TOC)		Geen abnormale verandering	30	
Kationen				
Ammonium	mg/l	0.5	30	0.15

*Bron: 20 JANUARI 2023. — Besluit van de Vlaamse Regering over de kwaliteit, kwantiteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie (BS 08.03.2023).

- (1) Uiterlijk op 12 januari 2036 moet aan de parameterwaarde van 25 µg/l worden voldaan. Tot die datum bedraagt de parameterwaarde voor chroom 50 µg/l.
- (2) Uiterlijk op 12 januari 2036 moet aan de parameterwaarde van 5 µg/l worden voldaan. Tot die datum bedraagt de parameterwaarde voor lood 10 µg/l.
- (3) De waterleverancier moet ernaar streven om de waarde van 200 µg/l bij de uitstroom van de waterbehandelingsinstallatie niet te overschrijden.

B.2 ORGANISCHE PARAMETERS

Toelichting legende:

- OW: oppervlaktewater
- GW: grondwater
- DW: drinkwater
- MKN: milieukwaliteitsnorm
- NM: normwaarde
- LOQ: limit of quantification (bepalingsgrens)

Opmerking: Voor afvalwater wordt verwezen naar VLAREM II Bijlage 4.2.5.2

Tabel 5: Oppervlaktewater (OW) – organische parameters

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>OW Bijlage 2.3.1 art 3 (laagste MKN)</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>
Acrylamide	µg/l			-
Minerale olie (GC)	µg/l			100
Geëmulgeerde of opgeloste koolwaterstoffen (na extractie met ether) minerale oliën	µg/l			
Petroleumether extraheerbare stoffen	mg/l			20
Perchloorethyleen extraheerbare apolaire stoffen	mg/l			0.4
Oliën en Vetten (IR)	mg/l			0.4
Oliën en vetten (gravim)	mg/l			20
EOX	µg Cl/l			5
AOX	µg Cl/l	40	12	20
POX	µg Cl/l			10
VOCI. MAK				
vinylchloride	µg/l	100	30	1
chloorethaan	µg/l			1
1.1-dichlooretheen	µg/l	50	15	1
dichloormethaan	µg/l	20	6	2.5
1.1-dichloorethaan	µg/l	100	30	1
2.2-dichloorpropaan	µg/l			1
1.2-dichlooretheen. cis	µg/l		1.5	1
1.2-dichlooretheen. trans	µg/l		1.5	1
1.2-dichloorethenen (som)	µg/l	10	3	1
broomchloormethaan	µg/l			1

Parameter	Eenheid	OW Bijlage 2.3.1 art 3 (laagste MKN)	30% NW cfr 2009/90/EC	LOQ_{max}
chloroform (trichloormethaan)	µg/l	2.5	0.75	1
1.1.1-trichloorethaan	µg/l	20	6	1
1.1-dichloorpropeen	µg/l			1
koolstoftetrachloride (tetrachloormethaan)	µg/l	12	3.6	1
1.2-dichloorethaan (EDC)	µg/l	10	3	1
trichloorethyleen	µg/l	10	3	1
1.2-dichloorpropaan	µg/l	400	120	1
dibroommethaan	µg/l			1
broomdichloormethaan	µg/l			1
1.3-dichloorpropeen-cis	µg/l	2 (som)	0.3	1
1.3-dichloorpropeen-trans	µg/l		0.3	1
1.1.2-trichloorethaan	µg/l	20	6	1
tetrachloorethyleen	µg/l	10	3	1
1.3-dichloorpropaan	µg/l			1
dibroomchloormethaan	µg/l			1
1.2-dibroommethaan	µg/l	0.003	0.001	1
chloorbenzeen	µg/l	6	1.8	1
1.1.1.2-tetrachloorethaan	µg/l			1
bromoform (tribroommethaan)	µg/l			1
1.1.2.2-tetrachloorethaan	µg/l	100	30	1
broombenzeen	µg/l			1
1.2.3-trichloorpropaan	µg/l			1
2-chloortolueen	µg/l	3 (som monoCltoluenen)	0.3	1
4-chloortolueen	µg/l		0.3	1
1.3-dichloorbenzeen	µg/l	20 (som)	3	1
1.4-dichloorbenzeen	µg/l		3	1
1.2-dichloorbenzeen	µg/l		3	1
1.2-dibroom-3-chloorpropaan	µg/l			1
1.2.4-trichloorbenzeen	µg/l		0.04	0.1
hexachloorbutadieen	µg/l	0.6	0.2	0.1
1.2.3-trichloorbenzeen	µg/l		0.04	0.1
1.3.5-trichloorbenzeen	µg/l		0.04	0.1
trichloorbenzenen (som)	µg/l	0.4	0.12	0.3
tetrachlooretheen + trichlooretheen	µg/l			2
trihalomethanen-totaal	µg/l			4
MAK				
benzeen	µg/l	10	3	1
tolueen	µg/l	90	27	1
ethylbenzeen	µg/l	5	1.5	1
m- + p-xyleen	µg/l		0.8	2
o-xyleen	µg/l		0.4	1

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>OW Bijlage 2.3.1 art 3 (laagste MKN)</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>
xylene (som)	µg/l	4	1.2	3
styreen	µg/l			1
isopropylbenzeen	µg/l	1	0.3	1
n-propylbenzeen	µg/l			1
1.3.5-trimethylbenzeen	µg/l			1
tert-butylbenzeen	µg/l			1
1.2.4-trimethylbenzeen	µg/l			1
1.2.3-trimethylbenzeen	µg/l			1
sec butylbenzeen	µg/l			1
p-isopropyltolueen	µg/l			1
n-butylbenzeen	µg/l			1
naftaleen	µg/l	2	0.6	1
methyl-t-butyl-ether (MTBE)	µg/l			4
n-hexaan	µg/l			4
n-heptaan	µg/l			10
n-octaan	µg/l			10
CIKWS (matig vluchtige)				
hexachloorethaan	µg/l	3	0.9	0.5
1.3.5-trichloorbenzeen	µg/l		0.04	0.1
1.2.4-trichloorbenzeen	µg/l		0.04	0.1
1.2.3-trichloorbenzeen	µg/l		0.04	0.1
trichloorbenzenen (som)	µg/l	0.4	0.12	0.3
hexachloorbutadien (HCBD)	µg/l	0.6	0.2	0.1
(1.2.3.5+1.2.4.5)-tetrachloorbenzeen	µg/l	9	2.7	0.2
1.2.3.4-tetrachloorbenzeen	µg/l			0.1
2-chloornaftaleen	µg/l	1 (som)	0.15	0.1
1-chloornaftaleen	µg/l		0.15	0.1
pentachloorbenzeen	µg/l	0.007	0.0021	0.1
hexachloorbenzeen	µg/l	0.05	0.01	0.1
Fenolen				
fenol	µg/l			0.5
2-methylfenol (o-cresol)	µg/l			0.1
3-methylfenol (m-cresol)	µg/l			0.1
4-methylfenol (p-cresol)	µg/l			0.1
2.3-dimethylfenol	µg/l			0.1
2.4-dimethylfenol	µg/l			0.1
2.5-dimethylfenol	µg/l			0.1
2.6-dimethylfenol	µg/l			0.1
3.4-dimethylfenol	µg/l			0.1

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>OW Bijlage 2.3.1 art 3 (laagste MKN)</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>
3.5-dimethylfenol	µg/l			0.1
2-ethylfenol	µg/l			0.1
3-ethylfenol	µg/l			0.1
4-ethylfenol	µg/l			0.1
2-isopropylfenol	µg/l			0.1
2.3.5-trimethylfenol	µg/l			0.1
t-octylfenol	µg/l	0.1	0.03	0.03
nonylfenol	µg/l	0.3	0.09	0.3
bisfenol A	µg/l			0.1
4-chloor-3-methylfenol	µg/l	9	2.7	0.1
4-chloor-3.5-dimethylfenol (dettol)	µg/l			0.1
2-chloorfenol	µg/l	20 (som)	2	0.1
3-chloorfenol	µg/l		2	0.1
4-chloorfenol	µg/l		2	0.1
2.3-dichloorfenol	µg/l			0.1
2.4-dichloorfenol	µg/l	2	0.6	0.1
2.5-dichloorfenol	µg/l			0.1
2.6-dichloorfenol	µg/l			0.1
3.4-dichloorfenol	µg/l			0.1
3.5-dichloorfenol	µg/l			0.1
2.3.4-trichloorfenol	µg/l	6 (som)	0.3	0.1
2.3.5-trichloorfenol	µg/l		0.3	0.1
2.3.6-trichloorfenol	µg/l		0.3	0.1
2.4.5-trichloorfenol	µg/l		0.3	0.1
2.4.6-trichloorfenol	µg/l		0.3	0.1
3.4.5-trichloorfenol	µg/l		0.3	0.1
2.3.4.5-tetrachloorfenol	µg/l			0.1
2.3.4.6-tetrachloorfenol	µg/l			0.1
2.3.5.6-tetrachloorfenol	µg/l			0.1
pentachloorfenol	µg/l	0.4	0.12	0.1
Organofluorverbindingen – PFAS				
perfluor-n-butaanzuur (PFBA)	µg/l			0.01
perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA)	µg/l			0.01
perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA)	µg/l			0.01
perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA)	µg/l			0.01
perfluor-n-octaanzuur (PFOA)	µg/l			0.01
perfluor-n-nonaanzuur (PFNA)	µg/l			0.01
perfluor-n-decaanzuur (PFDA)	µg/l			0.01
perfluor-n-undecaanzuur (PFUnDA)	µg/l			0.01
perfluor-n-dodecaanzuur (PFDoDA)	µg/l			0.01
perfluor-n-tridecaanzuur (PFTTrDA)	µg/l			0.05

Parameter	Eenheid	OW Bijlage 2.3.1 art 3 (laagste MKN)	30% NW cfr 2009/90/EC	LOQ_{max}
perfluor-n-tetradecaanzuur (PFTeDA)	µg/l			0.01
perfluor-n-hexadecaanzuur (PFHxDA)	µg/l			0.01
perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS)	µg/l			0.01
perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS)	µg/l			0.01
perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS)	µg/l			0.01
perfluor-n-heptaansulfonzuur (PFHpS)	µg/l			0.01
perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS)	µg/l	0.00065	0.00018	0.01
perfluor-n-nonaansulfonzuur (PFNS)	µg/l			0.01
perfluor-n-decaansulfonzuur (PFDS)	µg/l			0.01
4:2 fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS)	µg/l			0.01
8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS)	µg/l			0.01
perfluor-n-octaansulfonamide (PFOSA)	µg/l			0.01
N-methylperfluor-octaansulfonamide (MePFOSA)	µg/l			0.01
N-ethylperfluor-octaansulfonamide (EtPFOSA)	µg/l			0.01
N-methylperfluor-octaansulfonamido-azijnzuur (MePFOSAA)	µg/l			0.01
N-ethylperfluor-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)	µg/l			0.01
8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP)	µg/l			0.01
6:2/8:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2 8:2 diPAP)	µg/l			0.05
perfluor-2-propoxypropaanzuur (HFPO-DA)	µg/l			0.01
4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	µg/l			0.01
perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	µg/l			0.01
perfluor-n-octadecaanzuur (PFODA)	µg/l			0.05
perfluor-n-dodecaansulfonzuur (PFDoDS)	µg/l			0.05
perfluor-n-undecaansulfonzuur (PFUnDS)	µg/l			0.05
perfluor-n-tridecaansulfonzuur (PFTrDS)	µg/l			0.05
6:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2 diPAP)	µg/l			0.05
6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS)	µg/l			0.01
10:2 fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS)	µg/l			0.05
perfluor-n-butaansulfonamide (PFBSA)	µg/l			0.01
N-methylperfluor-n-butaansulfonamide (MePFBSA)	µg/l			0.01
N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide acetaat (MePFBSAA)	µg/l			0.01
perfluor-n-hexaansulfonamide (PFHxSA)	µg/l			0.01
perfluor-octaanzuur (som van lineaire en vertakte) (PFOAtotaal)	µg/l			0.05
perfluor-octaansulfonzuur (som van lineaire en vertakte) (PFOSAtotaal)	µg/l			0.05
perfluor-octaansulfonamide (som van lineaire en vertakte) (PFOSAtotaal)	µg/l			0.05

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>OW Bijlage 2.3.1 art 3 (laagste MKN)</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>
N-methylperfluorooctaansulfonamide (som van lineaire en vertakte) (MePFOSAtotaal)	µg/l			0.05
N-ethylperfluorooctaansulfonamide (som van lineaire en vertakte) (EtPFOSAtotaal)	µg/l			0.05
perfluorhexaansulfonzuur (som van lineaire en vertakte) (PFHxStotaal)	µg/l			0.05
PAKs				
naftaleen	µg/l	2	0.6	1
benzo(a)pyreen	µg/l	0.00017	0.00005	0.03
fenanthreen	µg/l	0.1	0.03	0.03
fluorantheen	µg/l	0.0063	0.002	0.03
benzo(a)anthraceen	µg/l	0.3	0.09	0.03
chryseen	µg/l	1	0.3	0.03
benzo(b)fluorantheen	µg/l	0.03 (som)	0.005	0.03
benzo(k)fluorantheen	µg/l		0.005	0.03
benzo(g,h,i)peryleen	µg/l	0.002 (som)	0.0003	0.03
indeno(1.2.3-c-d)pyreen	µg/l		0.0003	0.03
antraceen	µg/l	0.1	0.03	0.03
fluoreen	µg/l	2	0.6	0.03
dibenzo(a,h)antraceen	µg/l	0.5	0.15	0.03
acenaftteen	µg/l	0.06	0.018	0.03
acenaftyleen	µg/l	4	1.2	0.03
pyreen	µg/l	0.04	0.012	0.03
PCB				
PCB 28	µg/l	0.002 (som)	0.0001	0.02
PCB 52	µg/l		0.0001	0.02
PCB 101	µg/l		0.0001	0.02
PCB 118	µg/l		0.0001	0.02
PCB 153	µg/l		0.0001	0.02
PCB 138	µg/l		0.0001	0.02
PCB 180	µg/l		0.0001	0.02
OCP				
aldrin	µg/l	0.01 (som)	0.00075	0.05
dieldrin	µg/l		0.00075	0.05
isodrin	µg/l		0.00075	0.05
endrin	µg/l		0.00075	0.05
cis-chlordaan	µg/l	0.002 (som)	0.0003	0.05
trans-chlordaan	µg/l		0.0003	0.05
p.p'-DDT	µg/l	0.01	0.003	0.05
p.p'-DDD	µg/l	0.025 (som)	0.003	0.05

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>OW Bijlage 2.3.1 art 3 (laagste MKN)</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>
p.p'-DDE	µg/l		0.003	0.05
o.p'-DDT	µg/l		0.003	0.05
p.p'-DDT	µg/l		0.003	0.05
o.p'-DDD	µg/l			0.05
o.p'-DDE	µg/l			0.05
lindaan (α-isomeer)	µg/l	0.02 (som)	0.0015	0.05
lindaan (β-isomeer)	µg/l		0.0015	0.05
lindaan (γ-isomeer)	µg/l		0.0015	0.05
lindaan (δ-isomeer)	µg/l		0.0015	0.05
heptachloor	µg/l	0.0000002 (som)	0.00000002	0.05
α-heptachloorepoxide	µg/l		0.00000002	0.05
β-heptachloorepoxide	µg/l		0.00000002	0.05
α-endosulfan	µg/l	0.005 (som)	0.00075	0.07
β-endosulfan	µg/l		0.00075	0.07
endosulfansulfaat	µg/l			0.07
endosulfan (α+β+sulfaat)	µg/l			0.2
2.3.5.6-tetrachloornitrobenzeen (tecnazeen)	µg/l			0.05
pentachloornitrobenzeen (quintozeen)	µg/l			0.05
methoxychlor	µg/l			0.05
dicofol (p,p'-)	µg/l	0.0013	0.0004	0.03
OPP				
azinfos-methyl	µg/l	0.002	0.0006	0.025
azinfos-ethyl	µg/l	0.01	0.003	0.025
bromophos (bromophos-methyl)	µg/l			0.025
bromophos-ethyl	µg/l			0.025
chlorfenvinphos	µg/l	0.1	0.03	0.025
chlorpyrifos	µg/l	0.03	0.009	0.025
chlorpyrifos-methyl	µg/l			0.025
diazinon	µg/l			0.025
dichloorvos	µg/l	0.0006	0.00018	0.025
dimethoaat	µg/l	0.02	0.006	0.025
ethoprofos	µg/l			0.025
fenitrothion	µg/l	0.0009	0.00027	0.025
fenthion	µg/l	0.0002	0.00006	0.025
fonofos	µg/l			0.025
malathion	µg/l	0.0008	0.00024	0.025
methidathion	µg/l			0.025
mevinfos	µg/l	0.002	0.0006	0.025
parathion-ethyl	µg/l	0.0002	0.00006	0.025
parathion-methyl	µg/l	0.01	0.003	0.025

Parameter	Eenheid	OW Bijlage 2.3.1 art 3 (laagste MKN)	30% NW cfr 2009/90/EC	LOQ_{max}
pirimiphos-methyl	µg/l			0.025
terbufos	µg/l			0.025
disulfoton	µg/l	0.01	0.003	0.025
ONP				
Triazineherbiciden				
atrazine	µg/l	0.6	0.18	0.025
cyanazine	µg/l			0.025
desethylatrazine	µg/l			0.025
hexazinone	µg/l			0.025
prometryn	µg/l			0.025
propazine	µg/l			0.025
sebutylazine	µg/l			0.025
simazine	µg/l	1	0.3	0.025
terbutryn	µg/l	0.065	0.02	0.025
terbutylazine	µg/l			0.025
uronen (fenylurea) en anilides				
alachlor	µg/l	0.3	0.09	0.025
chloortoluron	µg/l			0.025
diuron	µg/l	0.2	0.06	0.025
isoproturon	µg/l	0.3	0.09	0.025
linuron	µg/l	0.3	0.09	0.025
metabenzthiazuron	µg/l			0.025
metabromuron	µg/l			0.025
metazachlor	µg/l			0.025
metolachlor	µg/l			0.025
metoxuron	µg/l			0.025
monolinuron	µg/l	0.3	0.09	0.025
propachlor	µg/l			0.025
carbendazim	µg/l			0.025
carbetamide	µg/l			0.025
Andere (stikstof)pesticiden (W.7.17)				
desisopropylatrazine	µg/l			0.025
chloridazon (pyrazon)	µg/l	10	3	0.025
ethofumesate	µg/l			0.025
metamitron	µg/l			0.025
desethylterbutylazine	µg/l			0.025
BAM (2.6-dichlorobenzamide)	µg/l			0.025
bromacil	µg/l			0.025
propanil	µg/l	0.2	0.06	0.1

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>OW Bijlage 2.3.1 art 3 (laagste MKN)</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>
trifluralin	µg/l	0.03	0.009	0.1
demeton	µg/l	0.05	0.015	0.1
triazophos	µg/l			0.1
coumafos	µg/l	0.001	0.0003	0.025
chlorpropham	µg/l			0.025
glyfosaat	µg/l			0.05
AMPA	µg/l			0.05
aclonifen	µg/l	0.12	0.036	0.005
bifenox	µg/l	0.012	0.0036	0.004
cybutryne	µg/l	0.0025	0.00075	0.002
cypermethrin	µg/l	0.00008	0.000024	0.006
quinoxifen	µg/l	0.15	0.045	0.002
Zure herbiciden				
2.4.5-trichloorfenoxo-azijnzuur (2.4.5-T)	µg/l	2	0.6	0.05
2.4dichloorfenoxiazijnzuur (2.4-D)	µg/l	20	6	0.05
bentazon	µg/l	50	15	0.05
dichlorprop	µg/l	20	6	0.05
fenoprop (2.4-P)	µg/l			0.05
fluroxypyr	µg/l			0.05
MCPA	µg/l	0.7	0.21	0.05
MCPB	µg/l			0.05
mecoprop (MCP)	µg/l	10	3	0.05
2.4-DB	µg/l			0.05
dicamba	µg/l			0.3
Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen		1000	300	300
alcoholethoxylaten (AE)	µg/l			10
alkylfenolethoxylaten (APE)	µg/l			10
Kationische oppervlakteactieve stoffen (indiv.)	µg/l	1000	300	10 indiv
Gebromeerde brandvertragers				
BDE 28	µg/l	0.14 (som)	0.007	0.025
BDE 47	µg/l		0.007	0.025
BDE 99	µg/l		0.007	0.025
BDE 100	µg/l		0.007	0.025
BDE 153	µg/l		0.007	0.025
BDE 154	µg/l		0.007	0.025
BDE 209	µg/l			0.04
HBCD	µg/l	0.0016	0.0005	0.02

Parameter	Eenheid	OW Bijlage 2.3.1 art 3 (laagste MKN)	30% NW cfr 2009/90/EC	LOQ_{max}
Organotinverbindingen				
dibutyltindichloride dibutyltinoxide dibutyltinzouten	µg Sn/l	0.08		0.03
tetrabutyltin	µg/l	0.012		0.004
Tributyltin	µg/l	0.0002		0.00006
trifenylinacetaat trifenylinchloride trifenylinhydroxide	µg/l	0.0003		0.0001
Aromatische amines				
aniline	µg/l			0.1
2-chloroaniline 3-chloroaniline 4-chloroaniline	µg/l	1 (som)	0.3 (som)	0.1 indiv
2,3-dichloroaniline 2,4-dichloroaniline 2,5-dichloroaniline 2,6-dichloroaniline 3,5-dichloroaniline	µg/l	0.2 (som)	0.06 (som)	0.01 indiv
3,4-dichloroaniline	µg/l	20 (som met 1,2-dichloorbenzeen)	6	0.1
2-chloro-4-methylaniline 3-chloro-2-methylaniline 4-chloro-2-methylaniline 2-chloro-5-methylaniline 2-chloro-6-methylaniline 4-chloro-3-methylaniline	µg/l	8 (som)	2.4 (som)	0.4 indiv
3,3'-dichlorobenzidine 4,4'-diamino-2,2'-dichlorobiphenyl	µg/l	0.5 (som)	0.15 (som)	0.07 indiv
2-amino-4-chlorophenol	µg/l	10	3	3
4-chloor-2-nitroaniline	µg/l	2	0.6	0.6
benzidine	µg/l	0.6	0.18	0.18
4,4'-diaminofenylmethaan	µg/l			0.1
4,4'-methylenebis(2-chloroaniline)	µg/l			0.1
2,4-diaminotolueen	µg/l			0.1
Ftaalzuuresters				
dimethylftalaat (DMP)	µg/l			1
diethylftalaat (DEP)	µg/l			1
di-n-butylftalaat (DBP)	µg/l			1
di-isobutylftalaat (DiBP)	µg/l			1
benzylbutylftalaat (BBP)	µg/l			1
di-n-octylftalaat (DnOP)	µg/l			1
dicyclohexylftalaat (DCHP)	µg/l			1
dipropylftalaat (DPrP)	µg/l			1
di-n-pentylftalaat (DnPP)	µg/l			1

Parameter	Eenheid	OW Bijlage 2.3.1 art 3 (laagste MKN)	30% NW cfr 2009/90/EC	LOQ_{max}
di-isopentylftalaat (DIPP)	µg/l			1
n-pentylisopentylftalaat (PIPP)	µg/l			1
di-n-hexylftalaat (DnHxP)	µg/l			1
di-isoheptylftalaat (DIHxP)	µg/l			1
di-n-heptylftalaat (DnHpP)	µg/l			1
di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)	µg/l			2
di-n-undecylftalaat (DnUP)	µg/l			1
di-isoheptylftalaat (mix van isomeren) (DIHxP-mix)	µg/l			5
di-isoheptylftalaat (mix van isomeren) (DIHpP-mix)	µg/l			5
di-isononylftalaat (mix van isomeren) (DINP-mix)	µg/l			5
di-isodecylftalaat (mix van isomeren) (DIDP-mix)	µg/l			5
di-isoundecylftalaat (mix van isomeren) (DIUP-mix)	µg/l			5

Tabel 6: Grondwater (GW) – organische parameters

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>GW MKN Vlarem Bijlage 2.4.1</i>	<i>GW Richtw Vlarebo</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>	<i>LOQ-eis CMA</i>
Acrylamide	µg/l				-	
Minerale olie (GC)	µg/l		300	90	100	
Geëmulgeerde of opgeloste koolwaterstoffen (na extractie met ether) minerale oliën	µg/l	10		3		
Petroleumether extraheerbare stoffen	mg/l				20	
Perchloorethyleen extraheerbare apolaire stoffen	mg/l				0.4	
Oliën en Vetten (IR)	mg/l				0.4	
Oliën en vetten (gravim)	mg/l				20	
EOX	µg Cl/l				5	
AOX	µg Cl/l				20	
POX	µg Cl/l				10	
VOC						
epichloorhydrine	µg/l				-	
vinylchloride	µg/l		2	0.6	1	1
chloorethaan	µg/l				1	
1.1-dichlooretheen	µg/l				1	
dichloormethaan	µg/l		5	1.5	2.5	2.5
1.1-dichloorethaan	µg/l		5	1.5	1	1
2.2-dichloorpropaan	µg/l				1	
1.2-dichlooretheen. cis	µg/l			0.75	1	1.2
1.2-dichlooretheen. trans	µg/l			0.75	1	1.2
1.2-dichloorethenen (som)	µg/l		5	1.5	1	
broomchloormethaan	µg/l				1	
chloroform (trichloormethaan)	µg/l		5	1.5	1	1
1.1.1-trichloorethaan	µg/l		5	1.5	1	1
1.1-dichloorpropeen	µg/l				1	
koolstoftetrachloride (tetrachloormethaan)	µg/l		1.2	0.36	0.6	0.6
1.2-dichloorethaan (EDC)	µg/l		5	1.5	1	1
trichloorethyleen	µg/l	10 miv PER	5	1.5	1	1
1.2-dichloorpropaan	µg/l				1	
dibroommethaan	µg/l				1	

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>GW MKN Vlarem Bijlage 2.4.1</i>	<i>GW Richtw Vlarebo</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>	<i>LOQ-eis CMA</i>
broomdichloormethaan	µg/l				1	
1.3-dichloorpropeen-cis	µg/l				1	
1.3-dichloorpropeen-trans	µg/l				1	
1.1.2-trichloorethaan	µg/l		5	1.5	1	1
tetrachloorethyleen	µg/l	10 miv TRI	5	1.5	1	1
1.3-dichloorpropaan	µg/l				1	
dibroomchloormethaan	µg/l				1	
1.2-dibroomethaan	µg/l				1	
chloorbenzeen	µg/l		5	1.5	1	1
1.1.1.2-tetrachloorethaan	µg/l				1	
bromoform (tribroommethaan)	µg/l				1	
1.1.2.2-tetrachloorethaan	µg/l				1	
broombenzeen	µg/l				1	
1.2.3-trichloorpropaan	µg/l				1	
2-chloortolueen	µg/l				1	
4-chloortolueen	µg/l				1	
1.3-dichloorbenzeen	µg/l		5	1.5	1	1
1.4-dichloorbenzeen	µg/l		5	1.5	1	1
1.2-dichloorbenzeen	µg/l		5	1.5	1	1
1.2-dibroom-3-chloorpropaan	µg/l				1	
1.2.4-trichloorbenzeen	µg/l		5	1.5	0.1	1
hexachloorbutadien	µg/l				0.1	
1.2.3-trichloorbenzeen	µg/l		5	1.5	0.1	1
1.3.5-trichloorbenzeen	µg/l		5	1.5	0.1	1
trichloorbenzenen (som)	µg/l				0.3	
Tetrachlooretheen + trichlooretheen	µg/l				2	
trihalomethanen-totaal	µg/l				4	
MAK						
benzeen	µg/l		2	0.6	1	1
tolueen	µg/l		20	6	1	4
ethylbenzeen	µg/l		20	6	1	4
m- + p-xyleen	µg/l			4	2	2
o-xyleen	µg/l			2	1	1
xylenen (som)	µg/l		20	6	3	
styreen	µg/l		10	3	1	2
isopropylbenzeen	µg/l				1	
n-propylbenzeen	µg/l				1	
1.3.5-trimethylbenzeen	µg/l		150	45	1	10
tert-butylbenzeen	µg/l				1	
1.2.4-trimethylbenzeen	µg/l		150	45	1	10

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>GW MKN Vlarem Bijlage 2.4.1</i>	<i>GW Richtw Vlarebo</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>	<i>LOQ-eis CMA</i>
1.2.3-trimethylbenzeen	µg/l		150	45	1	10
sec butylbenzeen	µg/l				1	
p-isopropyltolueen	µg/l				1	
n-butylbenzeen	µg/l				1	
naftaleen	µg/l				1	
methyl-t-butyl-ether (MTBE)	µg/l		20	6	4	4
n-hexaan	µg/l				4	4
n-heptaan	µg/l				10	10
n-octaan	µg/l				10	10
CIKWS (matig vluchtige)						
hexachloorethaan	µg/l				0.5	
1.3.5-trichloorbenzeen	µg/l		5	1.5	0.1	1
1.2.4-trichloorbenzeen	µg/l		5	1.5	0.1	1
1.2.3-trichloorbenzeen	µg/l		5	1.5	0.1	1
trichloorbenzenen (som)	µg/l				0.3	
hexachloorbutadien (HCBD)	µg/l				0.1	
(1.2.3.5+1.2.4.5)- tetrachloorbenzeen	µg/l		10	3	0.2	2
1.2.3.4-tetrachloorbenzeen	µg/l		5	1.5	0.1	1
2-chloornaftaleen	µg/l				0.1	
1-chloornaftaleen	µg/l				0.1	
pentachloorbenzeen	µg/l		1.4	0.42	0.1	0.3
hexachloorbenzeen	µg/l		0.6	0.18	0.1	0.1
Fenolen		fenolgetal 0.5 µg/l C ₆ H ₅ OH				
fenol	µg/l				0.5	
2-methylfenol (o-cresol)	µg/l				0.1	
3-methylfenol (m-cresol)	µg/l				0.1	
4-methylfenol (p-cresol)	µg/l				0.1	
2.3-dimethylfenol (a)	µg/l				0.1	
2.4-dimethylfenol	µg/l				0.1	
2.5-dimethylfenol	µg/l				0.1	
2.6-dimethylfenol	µg/l				0.1	
3.4-dimethylfenol	µg/l				0.1	
3.5-dimethylfenol	µg/l				0.1	
2-ethylfenol	µg/l				0.1	
3-ethylfenol	µg/l				0.1	
4-ethylfenol	µg/l				0.1	

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>GW MKN Vlarem Bijlage 2.4.1</i>	<i>GW Richtw Vlarebo</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>	<i>LOQ-eis CMA</i>
2-isopropylfenol	µg/l				0.1	
2.3.5-trimethylfenol	µg/l				0.1	
t-octylfenol	µg/l				0.03	
nonylfenol	µg/l				0.3	
bisfenol A	µg/l				0.1	
4-chloor-3-methylfenol	µg/l				0.1	
4-chloor-3.5-dimethylfenol (dettol)	µg/l				0.1	
2-chloorfenol	µg/l		15	4.5	0.1	1
3-chloorfenol	µg/l				0.1	
4-chloorfenol	µg/l				0.1	
2.3-dichloorfenol	µg/l				0.1	
2.4-dichloorfenol	µg/l		9	2.7	0.1	1
2.5-dichloorfenol	µg/l				0.1	
2.6-dichloorfenol	µg/l				0.1	
3.4-dichloorfenol	µg/l				0.1	
3.5-dichloorfenol	µg/l				0.1	
2.3.4-trichloorfenol	µg/l				0.1	
2.3.5-trichloorfenol	µg/l				0.1	
2.3.6-trichloorfenol	µg/l				0.1	
2.4.5-trichloorfenol	µg/l		300	90	0.1	1
2.4.6-trichloorfenol	µg/l		200	60	0.1	1
3.4.5-trichloorfenol	µg/l				0.1	
2.3.4.5-tetrachloorfenol	µg/l				0.1	
2.3.4.6-tetrachloorfenol	µg/l		90	27	0.1	1
2.3.5.6-tetrachloorfenol	µg/l				0.1	
pentachloorfenol	µg/l		9	2.7	0.1	1
Organofluorverbindingen - PFAS						
perfluor-n-butaanzuur (PFBA)	µg/l				0.01	
perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA)	µg/l				0.01	
perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA)	µg/l				0.01	
perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA)	µg/l				0.01	
perfluor-n-octaanzuur (PFOA)	µg/l				0.01	
perfluor-n-nonaanzuur (PFNA)	µg/l				0.01	
perfluor-n-decaanzuur (PFDA)	µg/l				0.01	
perfluor-n-undecaanzuur (PFUnDA)	µg/l				0.01	
perfluor-n-dodecaanzuur (PFDoDA)	µg/l				0.01	
perfluor-n-tridecaanzuur (PFTTrDA)	µg/l				0.05	
perfluor-n-tetradecaanzuur (PFTeDA)	µg/l				0.01	
perfluor-n-hexadecaanzuur	µg/l				0.01	

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>GW MKN Vlarem Bijlage 2.4.1</i>	<i>GW Richtw Vlarebo</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>	<i>LOQ-eis CMA</i>
(PFHxDA)						
perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS)	µg/l				0.01	
perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS)	µg/l				0.01	
perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS)	µg/l				0.01	
perfluor-n-heptaansulfonzuur (PFHpS)	µg/l				0.01	
perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS)	µg/l				0.01	
perfluor-n-nonaansulfonzuur (PFNS)	µg/l				0.01	
perfluor-n-decaansulfonzuur (PFDS)	µg/l				0.01	
4:2 fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS)	µg/l				0.01	
8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS)	µg/l				0.01	
perfluor-n-octaansulfonamide (PFOSA)	µg/l				0.01	
N-methylperfluorooctaansulfonamide (MePFOSA)	µg/l				0.01	
N-ethylperfluorooctaansulfonamide (EtPFOSA)	µg/l				0.01	
N-methylperfluorooctaansulfonamido-azijnzuur (MePFOSAA)	µg/l				0.01	
N-ethylperfluorooctaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)	µg/l				0.01	
8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP)	µg/l				0.01	
6:2/8:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2 8:2 diPAP)	µg/l				0.05	
perfluor-2-propoxypropaanzuur (HFPO-DA)	µg/l				0.01	
4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	µg/l				0.01	
perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	µg/l				0.01	
perfluor-n-octadecaanzuur (PFODA)	µg/l				0.05	
perfluor-1-dodecaansulfonzuur (PFDoDS)	µg/l				0.05	
perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnDS)	µg/l				0.05	
perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrDS)	µg/l				0.05	
6:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2 diPAP)	µg/l				0.05	
6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS)	µg/l				0.01	
10:2 fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS)	µg/l				0.05	
perfluor-n-butaansulfonamide (PFBSA)	µg/l				0.01	

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>GW MKN Vlarem Bijlage 2.4.1</i>	<i>GW Richtw Vlarebo</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>	<i>LOQ-eis CMA</i>
N-methylperfluor-n-butaan-sulfonamide (MePFBSA)	µg/l				0.01	
N-methylperfluor-n-butaan-sulfonylamide acetaat (MePFBSAA)	µg/l				0.01	
perfluor-n-hexaansulfonamide (PFHxSA)	µg/l				0.01	
perfluorooctaanzuur (som van lineaire en vertakte) (PFOAtotaal)	µg/l				0.05	
perfluorooctaansulfonzuur (som van lineaire en vertakte) (PFOSStotaal)	µg/l				0.05	
perfluorooctaansulfonamide (som van lineaire en vertakte) (PFOSAtotaal)	µg/l				0.05	
N-methylperfluorooctaansulfonamide (som van lineaire en vertakte) (MePFOSAtotaal)	µg/l				0.05	
N-ethylperfluorooctaansulfonamide (som van lineaire en vertakte) (EtPFOSAtotaal)	µg/l				0.05	
perfluorhexaansulfonzuur (som van lineaire en vertakte) (PFHxStotaal)	µg/l				0.05	
PAKs		0.2 µg/l totaal (6 refstoffen)				
naftaleen	µg/l		20	6	1	2
benzo(a)pyreen	µg/l	0.033	0.4	0.01	0.03	0.1
fenanthreen	µg/l		20	6	0.03	1
fluorantheen	µg/l	0.033	2	0.01	0.03	0.2
benzo(a)anthraceen	µg/l		2	0.6	0.03	0.2
chryseen	µg/l		0.9	0.27	0.03	0.1
benzo(b)fluorantheen	µg/l	0.033	0.7	0.01	0.03	0.1
benzo(k)fluorantheen	µg/l	0.033	0.4	0.01	0.03	0.1
benzo(g,h,i)peryleen	µg/l	0.033	0.1	0.01	0.03	0.05
indeno(1.2.3-c.d)pyreen	µg/l	0.033	0.06	0.02	0.03	0.03
antraceen	µg/l		20	6	0.03	0.5
fluoreen	µg/l		20	6	0.03	0.5
dibenzo(a,h)antraceen	µg/l		0.3	0.09	0.03	0.06
acenaftteen	µg/l		20	6	0.03	0.5
acenaftyleen	µg/l		20	6	0.03	0.5
pyreen	µg/l		20	6	0.03	0.5
PCB						
PCB 28	µg/l	0.1			0.02	
PCB 52	µg/l	0.1			0.02	

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>GW MKN Vlarem Bijlage 2.4.1</i>	<i>GW Richtw Vlarebo</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>	<i>LOQ-eis CMA</i>
PCB 101	µg/l	0.1			0.02	
PCB 118	µg/l	0.1			0.02	
PCB 153	µg/l	0.1			0.02	
PCB 138	µg/l	0.1			0.02	
PCB 180	µg/l	0.1			0.02	
OCP		0.1 µg/l per stof 0.5 µg/l totaal				
aldrin	µg/l	0.1		0.03	0.01	0.01
dieldrin	µg/l	0.1		0.03	0.01	0.01
aldrin+dieldrin	µg/l		0.02	0.006	0.02	
cis-chlordaan	µg/l	0.1		0.03	0.03	0.03
trans-chlordaan	µg/l	0.1		0.03	0.03	0.03
chlordaan (cis+trans)	µg/l		0.12	0.036	0.06	
op'-DDD	µg/l	0.1		0.03	0.04	0.04
p.p'-DDD	µg/l	0.1		0.03	0.04	0.04
o.p'-DDE	µg/l	0.1		0.03	0.04	0.04
p.p'-DDE	µg/l	0.1		0.03	0.04	0.04
o.p'-DDT	µg/l	0.1		0.03	0.04	0.04
p.p'-DDT	µg/l	0.1		0.03	0.04	0.04
DDD+DDE+DDT	µg/l		1.2	0.36	0.24	
lindaan (α-isomeer)	µg/l	0.1	0.03	0.03	0.02	0.02
lindaan (β-isomeer)	µg/l	0.1	0.12	0.03	0.025	0.025
lindaan (γ-isomeer)	µg/l	0.1	1.2	0.03	0.05	0.25
lindaan (δ-isomeer)	µg/l	0.1		0.03	0.05	
isodrin	µg/l	0.1		0.03	0.05	
endrin	µg/l	0.1		0.03	0.05	
telodrin	µg/l	0.1		0.03	0.05	
heptachloor	µg/l	0.1		0.03	0.05	
α-heptachloorepoxide	µg/l	0.1		0.03	0.05	
β-heptachloorepoxide	µg/l	0.1		0.03	0.05	
α-endosulfan	µg/l	0.1		0.03	0.07	0.07
β-endosulfan	µg/l	0.1		0.03	0.07	0.07
endosulfansulfaat	µg/l	0.1		0.03	0.07	0.07
endosulfan (α+β+sulfaat)	µg/l		1	0.09	0.2	
2.3.5.6-tetrachloornitrobenzeen (tecnazeen)	µg/l	0.1		0.03	0.05	
pentachloornitrobenzeen (quintozeen)	µg/l	0.1		0.03	0.05	
methoxychlor	µg/l	0.1		0.03	0.05	

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>GW MKN Vlarem Bijlage 2.4.1</i>	<i>GW Richtw Vlarebo</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>	<i>LOQ-eis CMA</i>
dicofol (p,p'-)	µg/l	0.1		0.03	0.03	
OPP						
azinfos-methyl	µg/l	0.1		0.03	0.025	
azinfos-ethyl	µg/l	0.1		0.03	0.025	
bromophos (bromophos-methyl)	µg/l	0.1		0.03	0.025	
bromophos-ethyl	µg/l	0.1		0.03	0.025	
chlorfenvinphos	µg/l	0.1		0.03	0.025	
chlorpyrifos	µg/l	0.1		0.03	0.025	
chlorpyrifos-methyl	µg/l	0.1		0.03	0.025	
diazinon	µg/l	0.1		0.03	0.025	
dichloorvos	µg/l	0.1		0.03	0.025	
dimethoat	µg/l	0.1		0.03	0.025	
ethoprosfos	µg/l	0.1		0.03	0.025	
fenitrothion	µg/l	0.1		0.03	0.025	
fenthion	µg/l	0.1		0.03	0.025	
fonofos	µg/l	0.1		0.03	0.025	
malathion	µg/l	0.1		0.03	0.025	
methidathion	µg/l	0.1		0.03	0.025	
mevinfos	µg/l	0.1		0.03	0.025	
parathion-ethyl	µg/l	0.1		0.03	0.025	
parathion-methyl	µg/l	0.1		0.03	0.025	
pirimiphos-methyl	µg/l	0.1		0.03	0.025	
terbufos	µg/l	0.1		0.03	0.025	
disulfoton	µg/l	0.1		0.03	0.025	
ONP						
Triazineherbiciden	µg/l	0.1		0.03	0.025	
atrazine	µg/l	0.1		0.03	0.025	
cyanazine	µg/l	0.1		0.03	0.025	
desethylatrazine	µg/l	0.1		0.03	0.025	
hexazinone	µg/l	0.1		0.03	0.025	
prometryn	µg/l	0.1		0.03	0.025	
propazine	µg/l	0.1		0.03	0.025	
sebutylazine	µg/l	0.1		0.03	0.025	
simazine	µg/l	0.1		0.03	0.025	
terbutryn	µg/l	0.1		0.03	0.025	
terbutylazine	µg/l	0.1		0.03	0.025	
Uronen (fenylurea) en anilides						
alachlor	µg/l	0.1		0.03	0.025	
chloortoluron	µg/l	0.1		0.03	0.025	

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>GW MKN Vlarem Bijlage 2.4.1</i>	<i>GW Richtw Vlarebo</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>	<i>LOQ-eis CMA</i>
diuron	µg/l	0.1		0.03	0.025	
isoproturon	µg/l	0.1		0.03	0.025	
linuron	µg/l	0.1		0.03	0.025	
metabenzthiazuron	µg/l	0.1		0.03	0.025	
metabromuron	µg/l	0.1		0.03	0.025	
metazachlor	µg/l	0.1		0.03	0.025	
metolachlor	µg/l	0.1		0.03	0.025	
metoxuron	µg/l	0.1		0.03	0.025	
monolinuron	µg/l	0.1		0.03	0.025	
propachlor	µg/l	0.1		0.03	0.025	
carbendazim	µg/l	0.1		0.03	0.025	
carbetamide	µg/l	0.1		0.03	0.025	
Andere (stikstof)pesticiden (W.7.17)						
desisopropylatrazine	µg/l	0.1		0.03	0.025	
chloridazon (pyrazon)	µg/l	0.1		0.03	0.025	
ethofumesate	µg/l	0.1		0.03	0.025	
metamitron	µg/l	0.1		0.03	0.025	
desethylterbutylazine	µg/l	0.1		0.03	0.025	
BAM (2.6-dichlorobenzamide)	µg/l	0.1		0.03	0.025	
bromacil	µg/l	0.1		0.03	0.025	
propanil	µg/l	0.1		0.03	0.1	
trifluralin	µg/l	0.1		0.03	0.1	
demeton	µg/l	0.1		0.03	0.1	
triazophos	µg/l	0.1		0.03	0.1	
coumafos	µg/l	0.1		0.03	0.025	
chlorpropham	µg/l	0.1		0.03	0.025	
glyfosaat	µg/l	0.1		0.03	0.05	
AMPA	µg/l	0.1		0.03	0.05	
Zure herbiciden						
2.4.5-trichloorfenoxy-azijnzuur (2.4.5-T)	µg/l	0.1		0.03	0.05	
2.4-dichloorfenoxyazijnzuur (2.4-D)	µg/l	0.1		0.03	0.05	
bentazon	µg/l	0.1		0.03	0.05	
dichlorprop	µg/l	0.1		0.03	0.05	
fenoprop (2.4-P)	µg/l	0.1		0.03	0.05	
fluroxypyr	µg/l	0.1		0.03	0.05	
MCPA	µg/l	0.1		0.03	0.05	
MCPB	µg/l	0.1		0.03	0.05	
mecoprop (MCP)	µg/l	0.1		0.03	0.05	
2.4-DB	µg/l	0.1		0.03	0.05	

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>GW MKN Vlarem Bijlage 2.4.1</i>	<i>GW Richtw Vlarebo</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>	<i>LOQ-eis CMA</i>
dicamba	µg/l	0.1		0.03	0.3	
Kationische oppervlakteactieve stoffen (indiv.)	µg/l				10 indiv	
Gebromeerde brandvertragers						
BDE 28	µg/l				0.025	
BDE 47	µg/l				0.025	
BDE 99	µg/l				0.025	
BDE 100	µg/l				0.025	
BDE 153	µg/l				0.025	
BDE 154	µg/l				0.025	
BDE 209	µg/l				0.04	
HBCD	µg/l				0.02	
DBDPE	µg/l				0.02	
Organotinverbindingen						
dibutyltindichloride dibutyltinoxide dibutyltinzouten	µg Sn/l				0.03	
tetrabutyltin	µg/l				0.004	
tributyltin	µg/l				0.00006	
trifenylinacetaat trifenylinchloride trifenylinhydroxide	µg/l				0.0001	
Aromatische amines						
aniline	µg/l				0.1	
2-chloroaniline 3-chloroaniline 4-chloroaniline	µg/l				0.1 indiv	
2,3-dichloroaniline 2,4-dichloroaniline 2,5-dichloroaniline 2,6-dichloroaniline 3,5-dichloroaniline	µg/l				0.01 indiv	
3,4-dichloroaniline	µg/l				0.1	
2-chloro-4-methylaniline 3-chloro-2-methylaniline 4-chloro-2-methylaniline 2-chloro-5-methylaniline 2-chloro-6-methylaniline 4-chloro-3-methylaniline	µg/l				0.4 indiv	
3,3'-dichlorobenzidine 4,4'-diamino-2,2'-dichlorobiphenyl	µg/l				0.07 indiv	
2-amino-4-chlorophenol	µg/l				3	
4-chloor-2-nitroaniline	µg/l				0.6	

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>GW MKN Vlarem Bijlage 2.4.1</i>	<i>GW Richtw Vlarebo</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>	<i>LOQ-eis CMA</i>
benzidine	µg/l				0.18	
4,4'-diaminofenylmethaan	µg/l				0.1	
4,4'-methylenebis(2-chloroaniline)	µg/l				0.1	
2,4-diaminotolueen	µg/l				0.1	

Tabel 7: Drinkwater (DW) – organische parameters

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>DW richtlijn</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/ EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>
Acrylamide	µg/l	0.1 ⁽²⁾	0.03	0.03
Minerale olie (GC)	µg/l			100
Geëmulgeerde of opgeloste koolwaterstoffen (na extractie met ether) minerale oliën	µg/l			
Petroleumether extraheerbare stoffen	mg/l			20
Perchloorethyleen extraheerbare apolaire stoffen	mg/l			0.4
Oliën en Vetten (IR)	mg/l			0.4
Oliën en vetten (gravim)	mg/l			20
EOX	µg Cl/l			5
AOX	µg Cl/l			20
POX	µg Cl/l			10
VOCi. MAK				
epichloorhydrine	µg/l	0.1 ⁽²⁾	0.03	0.03
vinylchloride	µg/l	0.5 ⁽²⁾	0.1	0.5
chloorethaan	µg/l			1
1.1-dichlooretheen	µg/l			1
dichloormethaan	µg/l			2.5
1.1-dichloorethaan	µg/l			1
2.2-dichloorpropaan	µg/l			1
1.2-dichlooretheen. cis	µg/l			1
1.2-dichlooretheen. trans	µg/l			1
1.2-dichloorethenen (som)	µg/l			1
broomchloormethaan	µg/l			1

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>DW richtlijn</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>
chloroform (trichloormethaan)	µg/l		8	8
1.1.1-trichloorethaan	µg/l			1
1.1-dichloorpropeen	µg/l			1
koolstoftetrachloride (tetrachloormethaan)	µg/l			1
1.2-dichloorethaan (EDC)	µg/l	3	0.9	0.9
trichloorethyleen	µg/l		1	1
1.2-dichloorpropaan	µg/l			1
dibroommethaan	µg/l			1
broomdichloormethaan	µg/l	60	8	8
1.3-dichloorpropeen-cis	µg/l			1
1.3-dichloorpropeen-trans	µg/l			1
1.1.2-trichloorethaan	µg/l			1
tetrachloorethyleen	µg/l		1	1
1.3-dichloorpropaan	µg/l			1
dibroomchloormethaan	µg/l		8	8
1.2-dibroommethaan	µg/l			1
chloorbenzeen	µg/l			1
1.1.1.2-tetrachloorethaan	µg/l			1
bromoform (tribroommethaan)	µg/l		8	8
1.1.2.2-tetrachloorethaan	µg/l			1
broombenzeen	µg/l			1
1.2.3-trichloorpropaan	µg/l			1
2-chloortolueen	µg/l			1
4-chloortolueen	µg/l			1
1.3-dichloorbenzeen	µg/l			1
1.4-dichloorbenzeen	µg/l			1
1.2-dichloorbenzeen	µg/l			1
1.2-dibroom-3-chloorpropaan	µg/l			1
1.2.4-trichloorbenzeen	µg/l			2
hexachloorbutadieen	µg/l			0.1
1.2.3-trichloorbenzeen	µg/l			2
1.3.5-trichloorbenzeen	µg/l			2
trichloorbenzenen (som)	µg/l	20	6	6
tetrachlooretheen + trichlooretheen	µg/l	10	3	3
trihalomethanen-totaal	µg/l	100	30	30
MAK				
benzeen	µg/l	1	0.3	0.3
tolueen	µg/l			1
ethylbenzeen	µg/l			1

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>DW richtlijn</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>
m- + p-xyleen	µg/l		50	50
o-xyleen	µg/l		50	50
xylenen (som)	µg/l	500	150	150
styreen	µg/l	20	6	6
isopropylbenzeen	µg/l			1
n-propylbenzeen	µg/l			1
1.3.5-trimethylbenzeen	µg/l			1
tert-butylbenzeen	µg/l			1
1.2.4-trimethylbenzeen	µg/l			1
1.2.3-trimethylbenzeen	µg/l			1
sec butylbenzeen	µg/l			1
p-isopropyltolueen	µg/l			1
n-butylbenzeen	µg/l			1
naftaleen	µg/l			1
methyl-t-butyl-ether (MTBE)	µg/l			4
n-hexaan	µg/l			4
n-heptaan	µg/l			10
n-octaan	µg/l			10
CIKWS (matig vluchtige)				
hexachloorethaan	µg/l			0.5
1.3.5-trichloorbenzeen	µg/l			2
1.2.4-trichloorbenzeen	µg/l			2
1.2.3-trichloorbenzeen	µg/l			2
trichloorbenzenen (som)	µg/l			6
hexachloorbutadien (HCBD)	µg/l			0.1
(1.2.3.5+1.2.4.5)-tetrachloorbenzeen	µg/l			0.2
1.2.3.4-tetrachloorbenzeen	µg/l			0.1
2-chloornaftaleen	µg/l			0.1
1-chloornaftaleen	µg/l			0.1
pentachloorbenzeen	µg/l			0.1
hexachloorbenzeen	µg/l			0.1
Fenolen				
fenol	µg/l			0.5
2-methylfenol (o-cresol)	µg/l			0.1
3-methylfenol (m-cresol)	µg/l			0.1
4-methylfenol (p-cresol)	µg/l			0.1
2.3-dimethylfenol (a)	µg/l			0.1

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>DW richtlijn</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>
2.4-dimethylfenol	µg/l			0.1
2.5-dimethylfenol	µg/l			0.1
2.6-dimethylfenol	µg/l			0.1
3.4-dimethylfenol	µg/l			0.1
3.5-dimethylfenol (a)	µg/l			0.1
2-ethylfenol	µg/l			0.1
3-ethylfenol	µg/l			0.1
4-ethylfenol (a)	µg/l			0.1
2-isopropylfenol	µg/l			0.1
2.3.5-trimethylfenol	µg/l			0.1
t-octylfenol	µg/l			0.03
nonylfenol	µg/l			0.3
bisfenol A	µg/l			0.1
4-chloor-3-methylfenol	µg/l			0.1
4-chloor-3.5-dimethylfenol (dettol)	µg/l			0.1
2-chloorfenol	µg/l			0.1
3-chloorfenol	µg/l			0.1
4-chloorfenol	µg/l			0.1
2.3-dichloorfenol	µg/l			0.1
2.4-dichloorfenol (b)	µg/l			0.1
2.5-dichloorfenol (b)	µg/l			0.1
2.6-dichloorfenol	µg/l			0.1
3.4-dichloorfenol	µg/l			0.1
3.5-dichloorfenol (b)	µg/l			0.1
2.3.4-trichloorfenol	µg/l			0.1
2.3.5-trichloorfenol	µg/l			0.1
2.3.6-trichloorfenol	µg/l			0.1
2.4.5-trichloorfenol	µg/l			0.1
2.4.6-trichloorfenol	µg/l			0.1
3.4.5-trichloorfenol	µg/l			0.1
2.3.4.5-tetrachloorfenol	µg/l			0.1
2.3.4.6-tetrachloorfenol	µg/l			0.1
2.3.5.6-tetrachloorfenol	µg/l			0.1
pentachloorfenol	µg/l			0.05
Organofluorverbindingen – PFAS		0.1 µg/l som		
perfluor-n-butaanzuur (PFBA)	µg/l			0.01
perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA)	µg/l			0.01
perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA)	µg/l			0.01

<i>Parameter</i>	<i>Eenhe id</i>	<i>DW richtlijn</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/ EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>
perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA)	µg/l			0.01
perfluor-n-octaanzuur (PFOA)	µg/l			0.01
perfluor-n-nonaanzuur (PFNA)	µg/l			0.01
perfluor-n-decaanzuur (PFDA)	µg/l			0.01
perfluor-n-undecaanzuur (PFUnDA)	µg/l			0.01
perfluor-n-dodecaanzuur (PFDoDA)	µg/l			0.01
perfluor-n-tridecaanzuur (PFTrDA)	µg/l			0.05
perfluor-n-tetradecaanzuur (PFTeDA)	µg/l			0.01
perfluor-n-hexadecaanzuur (PFHxDA)	µg/l			0.01
perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS)	µg/l			0.01
perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS)	µg/l			0.01
perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS)	µg/l			0.01
perfluor-n-heptaansulfonzuur (PFHpS)	µg/l			0.01
perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS)	µg/l			0.01
perfluor-n-nonaansulfonzuur (PFNS)	µg/l			0.01
perfluor-n-decaansulfonzuur (PFDS)	µg/l			0.01
4:2 fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS)	µg/l			0.01
8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS)	µg/l			0.01
perfluor-n-octaansulfonamide (PFOSA)	µg/l			0.01
N-methylperfluorooctaansulfonamide (MePFOSA)	µg/l			0.01
N-ethylperfluorooctaansulfonamide (EtPFOSA)	µg/l			0.01
N-methylperfluorooctaansulfonamido-azijnzuur (MePFOSAA)	µg/l			0.01
N-ethylperfluorooctaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)	µg/l			0.01
8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP)	µg/l			0.01
6:2/8:2 fluortelomerfosfaat diester (6:2 8:2 diPAP)	µg/l			0.05
perfluor-2-propoxypropaanzuur (HFPO-DA)	µg/l			0.01
4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	µg/l			0.01
perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECBS)	µg/l			0.01
perfluor-n-octadecaanzuur (PFODA)	µg/l			0.05
perfluor-n-dodecaansulfonzuur (PFDoDS)	µg/l			0.05
perfluor-n-undecaansulfonzuur (PFUnDS)	µg/l			0.05
perfluor-n-tridecaansulfonzuur (PFTrDS)	µg/l			0.05
6:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2 diPAP)	µg/l			0.05
6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS)	µg/l			0.01
10:2 fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS)	µg/l			0.05
perfluor-n-butaansulfonamide (PFBSA)	µg/l			0.01
N-methylperfluor-n-butaansulfonamide (MePFBSA)	µg/l			0.01
N-methylperfluor-n-butaansulfonamide acetaat (MePFBSAA)	µg/l			0.01
perfluor-n-hexaansulfonamide (PFHxSA)	µg/l			0.01
perfluorooctaanzuur (som van lineaire en vertakte) (PFOAtotaal)	µg/l			0.05
perfluorooctaansulfonzuur (som van lineaire en vertakte)	µg/l			0.05

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>DW richtlijn</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>
(PFOS totaal)				
perfluorooctaansulfonamide (som van lineaire en vertakte) (PFOS totaal)	µg/l			0.05
N-methylperfluorooctaansulfonamide (som van lineaire en vertakte) (MePFOS totaal)	µg/l			0.05
N-ethylperfluorooctaansulfonamide (som van lineaire en vertakte) (EtPFOS totaal)	µg/l			0.05
perfluorhexaansulfonzuur (som van lineaire en vertakte) (PFHxS totaal)	µg/l			0.05
PAKs		0.1 µg/l (4-ref stoffen 10 refstoffen)		
naftaleen	µg/l			1
benzo(a)pyreen	µg/l	0.01	0.003	0.003
fenanthreen	µg/l			0.03 0.01
fluorantheen	µg/l			0.03 0.01
benzo(a)anthraceen	µg/l			0.03 0.01
chryseen	µg/l			0.03 0.01
benzo(b)fluorantheen	µg/l	0.025	0.007	0.007 0.01
benzo(k)fluorantheen	µg/l	0.025	0.007	0.007 0.01
benzo(g,h,i)peryleen	µg/l	0.025	0.007	0.007 0.01
indeno(1.2.3-c.d)pyreen	µg/l	0.025	0.007	0.007 0.01
antraceen	µg/l			0.03 0.01
fluoreen	µg/l			0.03
dibenzo(a,h)antraceen	µg/l			0.03
acenaftteen	µg/l			0.03
acenaftyleen	µg/l			0.03
pyreen	µg/l			0.03 0.01
PCB				
PCB 28	µg/l			0.02
PCB 52	µg/l			0.02
PCB 101	µg/l			0.02
PCB 118	µg/l			0.02
PCB 153	µg/l			0.02

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>DW richtlijn</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>
PCB 138	µg/l			0.02
PCB 180	µg/l			0.02
OCP		Pesticiden: 0.1 µg/l indiv 0.5µg/l totaal ⁽¹⁾		
aldrin	µg/l	0.03	0.01	0.03
dieldrin	µg/l	0.03	0.01	0.03
cis-chlordaan	µg/l	0.1	0.03	0.03
trans-chlordaan	µg/l	0.1	0.03	0.03
op'-DDD	µg/l	0.1	0.03	0.03
p,p'-DDD	µg/l	0.1	0.03	0.03
o,p'-DDE	µg/l	0.1	0.03	0.03
p,p'-DDE	µg/l	0.1	0.03	0.03
o,p'-DDT	µg/l	0.1	0.03	0.03
p,p'-DDT	µg/l	0.1	0.03	0.03
lindaan (α-isomeer)	µg/l	0.1	0.03	0.03
lindaan (β-isomeer)	µg/l	0.1	0.03	0.03
lindaan (γ-isomeer)	µg/l	0.1	0.03	0.03
lindaan (δ-isomeer)	µg/l	0.1	0.03	0.03
isodrin	µg/l	0.1	0.03	0.03
endrin	µg/l	0.1	0.03	0.03
telodrin	µg/l	0.1	0.03	0.03
heptachloor	µg/l	0.03	0.01	0.03
α-heptachloorepoxide	µg/l	0.03	0.01	0.03
β-heptachloorepoxide	µg/l	0.03	0.01	0.03
α-endosulfan	µg/l	0.1	0.03	0.07
β-endosulfan	µg/l	0.1	0.03	0.07
endosulfansulfaat	µg/l	0.1	0.03	0.07
2.3.5.6-tetrachloornitrobenzeen (tecnazeen)	µg/l	0.1	0.03	0.03
pentachloornitrobenzeen (quintozeen)	µg/l	0.1	0.03	0.03
methoxychlor	µg/l	0.1	0.03	0.03
dicofol (p,p'-)	µg/l	0.1	0.03	0.03
OPP				
azinfos-methyl	µg/l	0.1	0.03	0.03
azinfos-ethyl	µg/l	0.1	0.03	0.03
bromophos (bromophos-methyl)	µg/l	0.1	0.03	0.03
bromophos-ethyl	µg/l	0.1	0.03	0.03
chlorfenvinphos	µg/l	0.1	0.03	0.03

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>DW richtlijn</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>
chlorpyrifos	µg/l	0.1	0.03	0.03
chlorpyrifos-methyl	µg/l	0.1	0.03	0.03
diazinon	µg/l	0.1	0.03	0.03
dichloorvos	µg/l	0.1	0.03	0.03
dimethoat	µg/l	0.1	0.03	0.03
ethoprofos	µg/l	0.1	0.03	0.03
fenitrothion	µg/l	0.1	0.03	0.03
fenthion	µg/l	0.1	0.03	0.03
fonofos	µg/l	0.1	0.03	0.03
malathion	µg/l	0.1	0.03	0.03
methidathion	µg/l	0.1	0.03	0.03
mevinfos	µg/l	0.1	0.03	0.03
parathion-ethyl	µg/l	0.1	0.03	0.03
parathion-methyl	µg/l	0.1	0.03	0.03
pirimiphos-methyl	µg/l	0.1	0.03	0.03
terbufos	µg/l	0.1	0.03	0.03
disulfoton	µg/l	0.1	0.03	0.03
ONP				
Triazineherbiciden				
atrazine	µg/l	0.1	0.03	0.03
cyanazine	µg/l	0.1	0.03	0.03
desethylatrazine	µg/l	0.1	0.03	0.03
hexazinone	µg/l	0.1	0.03	0.03
prometryn	µg/l	0.1	0.03	0.03
propazine	µg/l	0.1	0.03	0.03
sebutylazine	µg/l	0.1	0.03	0.03
simazine	µg/l	0.1	0.03	0.03
terbutryn	µg/l	0.1	0.03	0.03
terbutylazine	µg/l	0.1	0.03	0.03
uronen (fenylurea) en anilides				
alachlor	µg/l	0.1	0.03	0.03
chloortoluron	µg/l	0.1	0.03	0.03
diuron	µg/l	0.1	0.03	0.03
isoproturon	µg/l	0.1	0.03	0.03
linuron	µg/l	0.1	0.03	0.03
metabenzthiazuron	µg/l	0.1	0.03	0.03
metabromuron	µg/l	0.1	0.03	0.03
metazachlor	µg/l	0.1	0.03	0.03
metolachlor	µg/l	0.1	0.03	0.03

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>DW richtlijn</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>
metoxuron	µg/l	0.1	0.03	0.03
monolinuron	µg/l	0.1	0.03	0.03
propachlor	µg/l	0.1	0.03	0.03
carbendazim	µg/l	0.1	0.03	0.03
carbetamide	µg/l	0.1	0.03	0.03
Andere (stikstof)pesticiden (W.7.17)				
desisopropylatrazine	µg/l	0.1	0.03	0.03
chloridazon (pyrazon)	µg/l	0.1	0.03	0.03
ethofumesate	µg/l	0.1	0.03	0.03
metamitron	µg/l	0.1	0.03	0.03
desethylterbutylazine	µg/l	0.1	0.03	0.03
BAM (2.6-dichlorobenzamide)	µg/l	0.1	0.03	0.03
bromacil	µg/l	0.1	0.03	0.03
propanil	µg/l	0.1	0.03	0.03
trifluralin	µg/l	0.1	0.03	0.03
demeton	µg/l	0.1	0.03	0.03
triazophos	µg/l	0.1	0.03	0.03
coumafos	µg/l	0.1	0.03	0.03
chlorpropham	µg/l	0.1	0.03	0.03
glyfosaat	µg/l	0.1	0.03	0.03
AMPA	µg/l	0.1	0.03	0.03
Zure herbiciden				
2.4.5-trichloorfenoxi-azijnzuur (2.4.5-T)	µg/l	0.1	0.03	0.03
2.4-dichloorfenoxiazijnzuur (2.4-D)	µg/l	0.1	0.03	0.03
bentazon	µg/l	0.1	0.03	0.03
dichlorprop	µg/l	0.1	0.03	0.03
fenoprop (2.4-P)	µg/l	0.1	0.03	0.03
fluroxypyr	µg/l	0.1	0.03	0.03
MCPA	µg/l	0.1	0.03	0.03
MCPB	µg/l	0.1	0.03	0.03
mecoprop (MCP)	µg/l	0.1	0.03	0.03
2.4-DB	µg/l	0.1	0.03	0.03
dicamba	µg/l	0.1	0.03	0.3
Kationische oppervlakteactieve stoffen (indiv.)	µg/l			10 indiv
Gebromeerde brandvertragers				
BDE 28	µg/l			0.025
BDE 47	µg/l			0.025

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>DW richtlijn</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>
BDE 99	µg/l			0.025
BDE 100	µg/l			0.025
BDE 153	µg/l			0.025
BDE 154	µg/l			0.025
BDE 209	µg/l			0.04
HBCD	µg/l			0.02
DBDPE	µg/l			0.02
Organotinverbindingen				
dibutyltindichloride dibutyltinoxide dibutyltinzouten	µg Sn/l			0.03
tetrabutyltin	µg/l			0.004
tributyltin	µg/l			0.00006
trifenylnitacetaat trifenylnitinchloride trifenylnitinhydroxide	µg/l			0.0001
Aromatische amines				
aniline	µg/l			0.1
2-chloroaniline 3-chloroaniline 4-chloroaniline	µg/l			0.1 indiv
2,3-dichloroaniline 2,4-dichloroaniline 2,5-dichloroaniline 2,6-dichloroaniline 3,5-dichloroaniline	µg/l			0.01 indiv
3,4-dichloroaniline	µg/l			0.1
2-chloro-4-methylaniline 3-chloro-2-methylaniline 4-chloro-2-methylaniline 2-chloro-5-methylaniline 2-chloro-6-methylaniline 4-chloro-3-methylaniline	µg/l			0.4 indiv
3,3'-dichlorobenzidine 4,4'-diamino-2,2'-dichlorobiphenyl	µg/l			0.07 indiv
2-amino-4-chlorophenol	µg/l			3
4-chloor-2-nitroaniline	µg/l			0.6
benzidine	µg/l			0.18
4,4'-diaminofenylmethaan	µg/l			0.1
4,4'-methylenebis(2-chloroaniline)	µg/l			0.1
2,4-diaminotolueen	µg/l			0.1
Ftaalzuuresters				

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>DW richtlijn</i>	<i>30% NW cfr 2009/90/EC</i>	<i>LOQ_{max}</i>
dimethylftalaat (DMP)	µg/l			1
diethylftalaat (DEP)	µg/l			1
di-n-butylftalaat (DBP)	µg/l			1
di-isobutylftalaat (DiBP)	µg/l			1
benzylbutylftalaat (BBP)	µg/l			1
di-n-octylftalaat (DnOP)	µg/l			1
dicyclohexylftalaat (DCHP)	µg/l			1
dipropylftalaat (DPrP)	µg/l			1
di-n-pentylftalaat (DnPP)	µg/l			1
di-isopentylftalaat (DIPP)	µg/l			1
n-pentylisopentylftalaat (PIPP)	µg/l			1
di-n-hexylftalaat (DnHxP)	µg/l			1
di-isohexylftalaat (DIHxP)	µg/l			1
di-n-heptylftalaat (DnHpP)	µg/l			1
di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)	µg/l			2
di-n-undecylftalaat (DnUP)	µg/l			1
di-isohexylftalaat (mix van isomeren) (DIHxP-mix)	µg/l			5
di-isohexylftalaat (mix van isomeren) (DIHxP-mix)	µg/l			5
di-isohexylftalaat (mix van isomeren) (DIHxP-mix)	µg/l			5
di-isononylftalaat (mix van isomeren) (DINP-mix)	µg/l			5
di-isodecylftalaat (mix van isomeren) (DIDP-mix)	µg/l			5
di-isodecylftalaat (mix van isomeren) (DIUP-mix)	µg/l			5

(1) M.u.v. dieldrin. aldrin. heptachlor. heptachlorepoxyde
(2) Wordt berekend